
CERTEST

SARS-CoV-2 + Flu A + Flu B + RSV

ONE STEP SARS-CoV-2, *Influenza type A*, *Influenza type B* and RSV Ag COMBO CARD TEST

CERTEST BIOTEC S.L.





FOR INFORMATION PURPOSES ONLY



CERTEST SARS-CoV-2 + Flu A + Flu B + RSV

One Step test to detect SARS-CoV-2, Influenza A, Influenza B and RSV antigens in combo card format/
Prueba combo de un solo paso para detección de SARS-CoV-2, Influenza A, Influenza B y RSV antígenos en formato cassette

ENGLISH

INTENDED USE

CerTest SARS-CoV-2 + Flu A + Flu B + RSV one step combo card test is a coloured chromatographic immunoassay for the simultaneous qualitative detection of nucleoprotein antigen of SARS-CoV-2, *Influenza* type A, *Influenza* type B and *Respiratory Syncytial Virus* from nasopharyngeal swab samples from patients suspected of COVID-19 infection and/or *Influenza* A and/or *Influenza* B and/or *Respiratory Syncytial Virus* (RSV) infection.

CerTest SARS-CoV-2 + Flu A + Flu B + RSV combo card test offers a simple and highly sensitive screening assay as aid in the diagnosis of SARS-CoV-2 and/or *Influenza* type A and/or *Influenza* type B and/or RSV infection.

INTRODUCTION

An unseen pneumonia spread swiftly in Wuhan, China, in December 2019. Scientists sequenced and recognized a novel β-coronavirus.

The disease, caused by the Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus 2 (SARS-CoV-2), is called as Coronavirus disease 2019 (COVID-19).

Coronaviruses (CoVs) are RNA, enveloped viruses, with a large genome (29.9 kb), amongst which β-CoVs and α-CoVs can infect mammals. Viruses belonging to the Coronaviridae family have the most abundant membrane protein (M) among other proteins, i.e. spike glycoprotein (S), nucleocapsid protein (N) and an envelope protein (E). Spike glycoprotein (S) is one of the targets of T cell response in the immune system. The S protein also promotes the binding of the virus envelope to the ACE2 receptor and the entry of the virus into the cell target. ACE2 receptors are present in cells of the arteries, veins, smooth muscles, small intestine, alveoli of the lungs, hair follicles, cardiac myofibroblasts, skin, brain, and kidney, thus SARS-CoV-2 could potentially infect these tissues.

Clinical forms of this disease comprise from mild to very severe symptoms: pneumonia, fever and respiratory symptoms are the most frequent. Other symptoms of the viral infection include a sore throat, aches, pains, and shortness of breath. In some cases, runny nose, nausea, and diarrhea also occur.

The outbreak of newly discovered coronavirus begins mainly via discharge from the nose or droplets of saliva, once an infected individual sneezes or coughs, and the estimated time for incubation is within 2 weeks. Due to the high infectious rate of SARS-CoV-2, detection of asymptomatic positive patients is probably one of the key points to controlling the outbreak.

Influenza is caused by a virus that attacks mainly the upper respiratory tract - the nose, throat and bronchi and rarely also the lungs. The infection usually lasts for about a week. It is characterized by sudden onset of high fever, myalgia, headache and severe malaise, non-productive cough, sore throat and rhinitis. Most people recover within one to two weeks without requiring any medical treatment. In the very young, the elderly and people suffering from medical conditions such as lung diseases, diabetes, cancer, kidney or heart problems, *Influenza* poses a serious risk. In these people, the infection may lead to severe complications of underlying diseases, pneumonia and death.

The currently circulating *Influenza* viruses that cause human disease are divided into two groups: A and B. *Influenza* A has 3 subtypes which are important for humans: A (H3N2), A (H1N1) and A (H5N1), of which the former is currently associated with most deaths. *Influenza* viruses are defined by 2 different protein components, known as antigens, on the surface of the virus. They are spike-like features called haemagglutinin (H) and neuraminidase (N) components.

Respiratory Syncytial Virus (RSV) is the most common cause of bronchiolitis and pneumonia among infants and children under 1 year of age. Illness begins most frequently with fever, runny nose, cough and sometimes wheezing. Severe lower respiratory tract disease may occur at any age, especially among the elderly or among those with compromised cardiac, pulmonary or immune systems. RSV is spread from respiratory secretions through close contact with infected persons or contact with contaminated surfaces or objects.

TEST PRINCIPLE

CerTest SARS-CoV-2 + Flu A + Flu B + RSV one step combo card test is a coloured chromatographic immunoassay for the simultaneous qualitative detection of nucleoprotein antigen of SARS-CoV-2, *Influenza* type A, *Influenza* type B and *Respiratory Syncytial Virus* from nasopharyngeal swab samples from patients suspected of COVID-19 infection and/or *Influenza* A and/or *Influenza* B and/or *Respiratory Syncytial Virus* (RSV) infection.

Strip A consists of a nitrocellulose membrane pre-coated with mouse monoclonal antibodies on the test line (T), in the results window, against SARS-CoV-2 and with rabbit polyclonal antibodies, on the control line (C), against a specific protein. The label/sample absorbent pad is sprayed with test label solution (mouse monoclonal antibodies anti-SARS-CoV-2) conjugated to red polystyrene latex and control label solution (specific binding protein) conjugated to green polystyrene latex, forming coloured conjugate complexes.

Strip B consists of a nitrocellulose membrane pre-coated with mouse monoclonal antibodies on the test line (T), in the results window, against *Influenza* type A and with rabbit polyclonal antibodies, on the control line (C), against a specific protein. The label/sample absorbent pad is





CERTEST SARS-CoV-2 + Flu A + Flu B + RSV

One Step test to detect SARS-CoV-2, Influenza A, Influenza B and RSV antigens in combo card format/
Prueba combo de un solo paso para detección de SARS-CoV-2, Influenza A, Influenza B y RSV antígenos en formato cassette

sprayed with test label solution (mouse monoclonal antibodies anti-Influenza type A) conjugated to red polystyrene latex and control label solution (specific binding protein) conjugated to green polystyrene latex, forming coloured conjugate complexes.

Strip C consists of a nitrocellulose membrane pre-coated with mouse monoclonal antibodies on the test line (T), in the results window, against Influenza type B and with rabbit polyclonal antibodies, on the control line (C), against a specific protein. The label/sample absorbent pad is sprayed with test label solution (mouse monoclonal antibodies anti-Influenza type B) conjugated to red polystyrene latex and control label solution (specific binding protein) conjugated to green polystyrene latex, forming two coloured conjugate complexes.

Strip D consists of a nitrocellulose membrane pre-coated with mouse monoclonal antibodies on the test line (T), in the results window, against RSV and with rabbit polyclonal antibodies, on the control line (C), against a specific protein. The label/sample absorbent pad is sprayed with test label solution (mouse monoclonal antibodies anti-RSV) conjugated to red polystyrene latex and control label solution (specific binding protein) conjugated to green polystyrene latex, forming two coloured conjugate complexes.

If the sample is SARS-CoV-2 positive, the antigens of the diluted sample react with the red-coloured conjugates complex (anti-SARS-CoV-2 monoclonal antibodies-red polystyrene microspheres) in the strip A and if the sample is Influenza A positive, the antigens of the diluted sample react with the red-coloured conjugated complex (anti-Influenza type A monoclonal antibodies-red polystyrene microspheres) in the strip B, which were previously pre-dried on the absorbent pad. If the sample is Influenza type B positive, the antigens of the diluted sample react with the red-coloured conjugated complex (anti-Influenza type B monoclonal antibodies-red polystyrene microspheres) in the strip C and if the sample is RSV positive, the antigens of the diluted sample react with the red-coloured conjugated complex (anti-RSV monoclonal antibodies-red polystyrene microspheres) in the strip D, which were previously pre-dried on the absorbent pad. The mixtures then move upward on the membrane by capillary action. As the sample flows through the test membrane, the binding conjugate complexes migrate. The anti-SARS-CoV-2 antibodies present on the membrane of strip A (test line), the anti-Influenza type A antibodies present on the membrane of strip B (test line), the anti-Influenza type B antibodies present on the membrane of strip C (test line) and the anti-RSV antibodies present on the membrane of strip D (test line) capture the coloured conjugate and a red line will be visible in the strips. These bands are used to interpret the result.

If the sample is negative, there is no SARS-CoV-2, Influenza type A, Influenza type B, and RSV antigens presence and yet, the antigens may be present in a concentration lower than the detection limit value, for which the reaction will not take place with any red-coloured conjugate complex. The anti-SARS-CoV-2, the anti-Influenza type A, the anti-Influenza type B and the anti-RSV antibodies present on the membranes (test lines) will not capture the antigen-red-coloured conjugate complex (not formed), for which the red lines will not appear.

Whether the sample is positive or not, in the four strips, the mixture continues to move across the membranes to the immobilized specific antibodies placed in the control lines. The anti-specific protein antibodies present on the four membranes will capture control green-conjugate complex and the four control lines will always appear. The presence of these green lines serve as: 1) verification that sufficient volume is added, 2) that proper flow is obtained and 3) an internal control for the reagents

STORAGE AND STABILITY

Store as packaged in the sealed pouch at 2-30°C. The test is stable until the expiration date marked on its sealed pouch. The test must remain in the sealed pouch until use. Do not freeze.

PRECAUTIONS

- For professional *in vitro* diagnostic use.
- Do not use after expiration date.
- All the specimens should be considered potentially hazardous (especially samples from patients suspected of SARS-CoV-2 infection) and handled in the same manner as an infectious agent. A new test must be used for each sample to avoid contamination errors.
- Use proper infection control practices when collecting and handling specimens. These practices should include, but are not limited to, personal protective equipment (PPE), such as a laboratory coat, surgical or appropriate mask, or face shield, disposable gloves, and eye protection. Follow local or national regulations regarding collecting and handling specimens.
- The tests (swabs, testing tubes, pipettes, positive control swab and devices) should be discarded in a proper biohazard container after testing. These containers should be discarded in accordance with local or national laws or regulations.
- Clean up spills thoroughly using an appropriate disinfectant.
- Reagents contain preservatives. Avoid any contact with skin or mucous membrane. Consult safety data sheet, available on request.
- Components provided in the kit are approved for use in the CerTest SARS-CoV-2 + Flu A + Flu B + RSV test. Do not use any other commercial kit component.
- Sterile swabs provided in the kits should be only used for taking the nasopharyngeal sample collection. They cannot be reuse.
- Do not touch the head of the sterile swabs provided when opening their primary packaging to avoid contamination.



CERTEST SARS-CoV-2 + Flu A + Flu B + RSV

One Step test to detect SARS-CoV-2, Influenza A, Influenza B and RSV antigens in combo card format/
Prueba combo de un solo paso para detección de SARS-CoV-2, Influenza A, Influenza B y RSV antígenos en formato cassette

- The presence of yellow lines in the results window (control line zone and test line zone), before using the test, is completely normal and does not imply failure of the test functionality.
- All positive results should be processed following local or national laws and regulations.

SPECIMEN COLLECTION AND PREPARATION


Samples should be process as soon as possible after collection. Follow proper infection control practices. If this is not possible, the samples can be stored in the refrigerator (2-8 °C) for a maximum of 8 hours prior to testing. If the samples are preserved in validated transport media (VTM, UTM o Saline Buffer) could be preserved on it until 6 hours at room temperature or in the refrigerator (2-8°C).

Specimen preparation (see illustration):

Nasopharyngeal swab method:

1. Remove the sterile swab from its packing.
2. Collect specimen with a sterile swab from one nostril.
3. Insert the swab into the nostril to the nasopharynx, rotating against the wall.
(to ensure swab contains cells as well as mucus). Remove the swab from the nostril carefully.
4. Consider repeating procedure using other nostril only if the protocol of the professional taking the sample required do it.
5. Process the swab as soon as possible after collecting the specimen.

Follow the test procedure (samples).

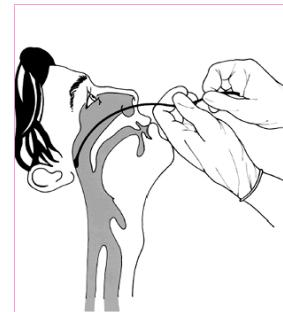

Specimen collection

Nasopharyngeal samples previously extracted by transport media:

Even while using direct nasopharyngeal swab is the preferred protocol, the device can be also used with samples from nasopharyngeal swabs previously diluted in transport media such as: VTM, UTM or Saline Buffer.

1. Use the minimum volume of transport media in order to avoid loss in sensitivity. Example: 1.0 mL. Using higher volumes will affect sensitivity of the system.
2. Dilute the extracted sample 1:1 in Reagent Respiratory (sample diluent) provided.

Follow immediately with the point 3 of test procedure (samples).

MATERIALS

MATERIALS PROVIDED

- CerTest SARS-CoV-2 + Flu A + Flu B + RSV combo card tests
- Reagent Respiratory (sample and controls diluent)
- Sterile Swabs
- Disposable pipettes
- Testing tubes
- Instructions for use
- Plastic caps
- Laboratory rack
- CerTest SARS-CoV-2 Positive Control
- CerTest Influenza A Positive Control
- CerTest Influenza B Positive Control
- CerTest RSV Positive Control

MATERIALS REQUIRED BUT NOT PROVIDED

- Disposable gloves (other personal protective equipment that will be considered necessary).
- Timer

TEST PROCEDURE (SAMPLES)

Follow proper infection control practices. Allow tests, samples to reach room temperature (15-30°C) prior to testing. Do not open pouches until the performance of the assay.

1. Put the tubes in the laboratory rack (identify properly samples from the different patients). Add 20 drops (approx. 670µL) (1) Reagent Respiratory and immediately put the swab into the tube.
2. Mix and homogenize the solution by rotating the swab forcefully against the side of the tube to allow the solution to mix for 15 seconds (2). Best results are obtained when it is mixed to extract as much liquid as possible from the swab avoiding splashes and aerosols. Rotate the swab against the side of the tube as the swab is withdrawn to extract as much liquid as possible. Discard the swab.
3. Remove the CerTest SARS-CoV-2 + Flu A + Flu B + RSV combo card test from its sealed bag just before using it.

CERTEST SARS-CoV-2 + Flu A + Flu B + RSV


**One Step test to detect SARS-CoV-2, Influenza A, Influenza B and RSV antigens in combo card format/
Prueba combo de un solo paso para detección de SARS-CoV-2, Influenza A, Influenza B y RSV antígenos en formato cassette**

4. Take the sample from the tube with the pipette (3). Close the tube with the plastic cap (4) and dispense 3 drops (approx. 100-120µL) from the pipette, into the circular window marked with the letter A (5), 3 drops (approx. 100-120µL), using the same tube and pipette, into the circular window marked with the letter B (6), 3 drops (approx. 100-120µL), using the same tube and pipette, into the circular window marked with the letter C (7) and 3 drops (approx. 100-120µL), using the same tube and pipette, into the circular window marked with the letter D (7).

5. **Read the results at 10 minutes.** Do not read the test result later than 10 minutes.


If the test does not run (it means that liquid -sample+ diluent- does not rise through the strip -reaction zone or result window- due to the type of sample), mix the liquid added in the sample window (S) with the pipette. If it doesn't work (test does not run), dispense a drop of Reagent Respiratory until seeing the liquid running through the reaction zone.

The Sample diluent buffer (Reagent Respiratory) has SARS-CoV-2 inactivation capability: 99.68% after 1 minute and 99.98% after 10 minutes.

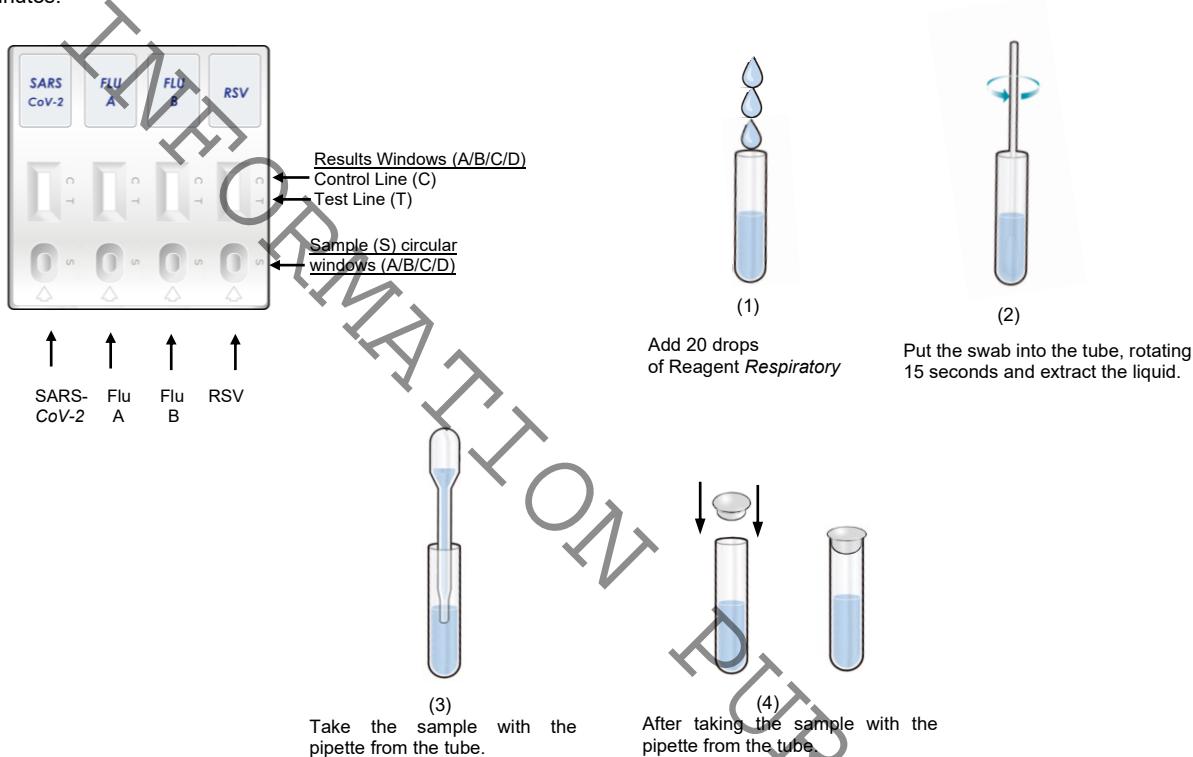


SARS-CoV-2 Strip A-procedure

Add 3 drops in A-circular window

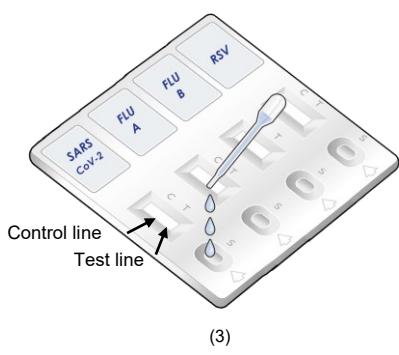

Influenza type A Strip B-procedure

Add 3 drops in B-circular window

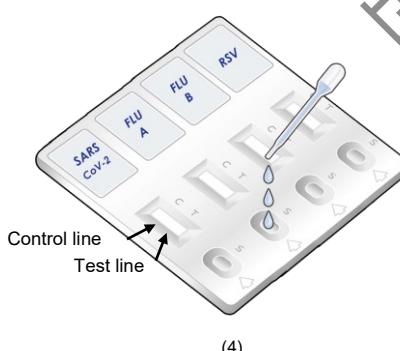




CERTEST SARS-CoV-2 + Flu A + Flu B + RSV

One Step test to detect SARS-CoV-2, Influenza A, Influenza B and RSV antigens in combo card format/
Prueba combo de un solo paso para detección de SARS-CoV-2, Influenza A, Influenza B y RSV antígenos en formato cassette


Influenza type B Strip C-procedure

Add 3 drops in C-circular window

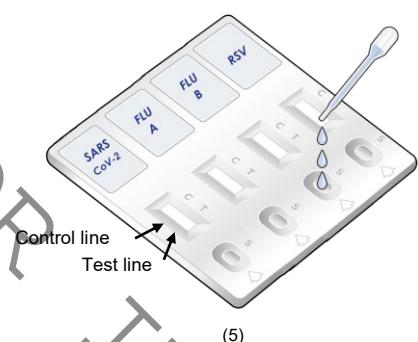


RSV Strip D procedure

Add 3 drops in D-circular window

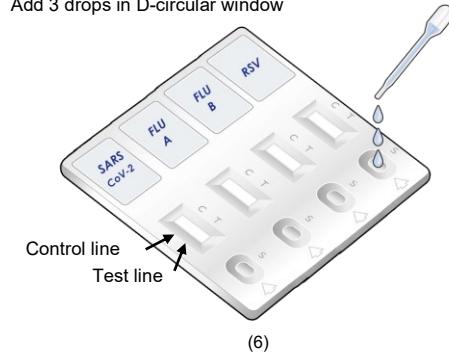


INTERPRETATION OF THE RESULTS (please refer to the illustration below)


VALID RESULTS

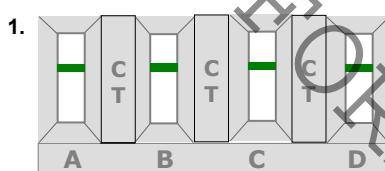


- A: Green→Negative SARS-CoV-2
- B: Green→Negative FLU A
- C: Green→Negative FLU B
- D: Green→Negative RSV

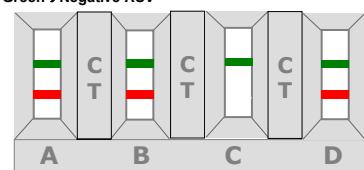


- A: Green/Red→Positive SARS-CoV-2
- B: Green/Red→Positive FLU A
- C: Green→Negative FLU B
- D: Green/Red→Positive RSV

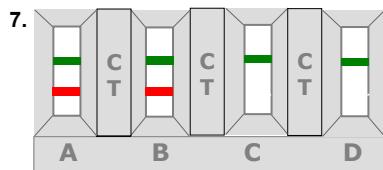


- A: Green/Red→Positive SARS-CoV-2
- B: Green/Red→Positive FLU A
- C: Green→Negative FLU B
- D: Green→Negative RSV

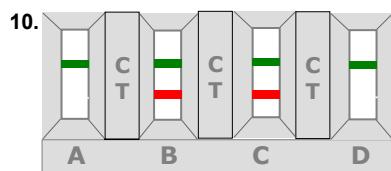


- A: Green→Negative SARS-CoV-2
- B: Green/Red→Positive FLU A
- C: Green/Red→Positive FLU B
- D: Green→Negative RSV

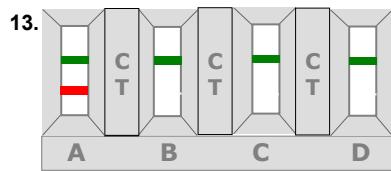


- A: Green/Red→Positive SARS-CoV-2
- B: Green→Negative FLU A
- C: Green→Negative FLU B
- D: Green→Negative RSV

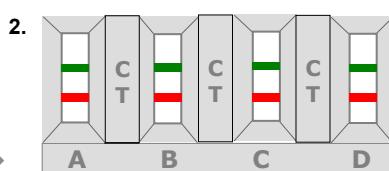


- A: Green/Red→Positive SARS-CoV-2
- B: Green/Red→Positive FLU A
- C: Green/Red→Positive FLU B
- D: Green/Red→Positive RSV

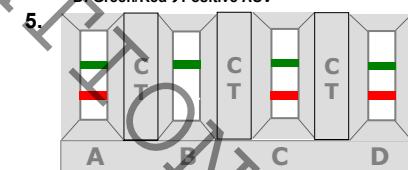


- A: Green/Red→Positive SARS-CoV-2
- B: Green→Negative FLU A
- C: Green/Red→Positive FLU B
- D: Green/Red→Positive RSV

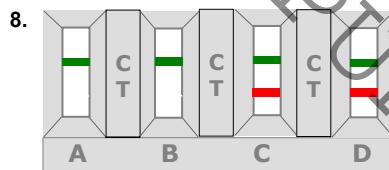


- A: Green→Negative SARS-CoV-2
- B: Green→Negative FLU A
- C: Green/Red→Positive FLU B
- D: Green/Red→Positive RSV

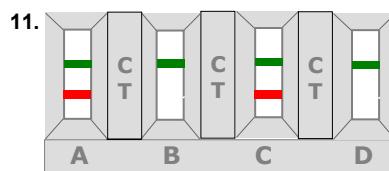


- A: Green/Red→Positive SARS-CoV-2
- B: Green→Negative FLU A
- C: Green/Red→Positive FLU B
- D: Green→Negative RSV

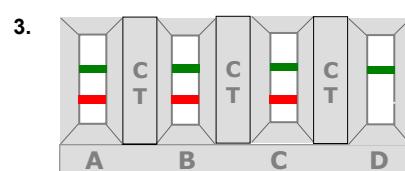


- A: Green/Red→Positive SARS-CoV-2
- B: Green/Red→Positive FLU A
- C: Green/Red→Positive FLU B
- D: Green→Negative RSV

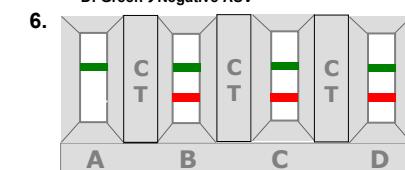


- A: Green→Negative SARS-CoV-2
- B: Green/Red→Positive FLU A
- C: Green/Red→Positive FLU B
- D: Green/Red→Positive RSV

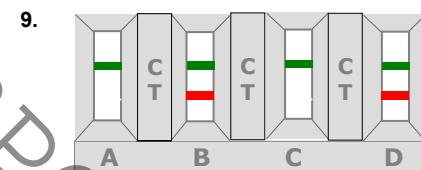

- A: Green→Negative SARS-CoV-2
- B: Green/Red→Positive FLU A
- C: Green→Negative FLU B
- D: Green/Red→Positive RSV

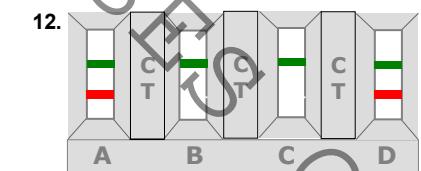

- A: Green/Red→Positive SARS-CoV-2
- B: Green→Negative FLU A
- C: Green→Negative FLU B
- D: Green/Red→Positive RSV

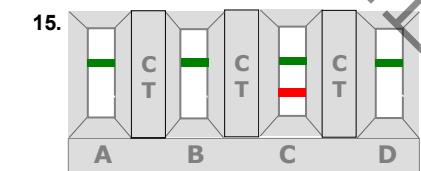


- A: Green→Negative SARS-CoV-2
- B: Green→Negative FLU A
- C: Green/Red→Positive FLU B
- D: Green→Negative RSV



CERTEST SARS-CoV-2 + Flu A + Flu B + RSV

One Step test to detect SARS-CoV-2, Influenza A, Influenza B and RSV antigens in combo card format/
Prueba combo de un solo paso para detección de SARS-CoV-2, Influenza A, Influenza B y RSV antígenos en formato cassette

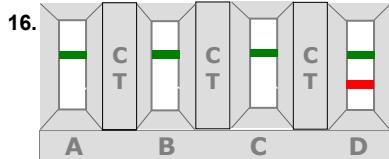

- A: Green→Negative SARS-CoV-2
 B: Green→Negative FLU A
 C: Green→Negative FLU B
 D: Green/Red→Positive RSV

| | A (SARS-CoV-2) | B (Influenza A) | C (Influenza B) | D (RSV) | Interpretation of the results |
|-----|---------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|--|
| 1. | - | - | - | - | There is no SARS-CoV-2, Influenza type A, Influenza type B, RSV antigens presence in sample. |
| | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN | |
| 2. | + | + | + | + | There is SARS-CoV-2, Influenza type A, Influenza type B and RSV antigens presence in the sample. The presence of these lines (control green line and test red line), independent of their intensity should be considered as a positive result. |
| | GREEN-RED | GREEN-RED | GREEN-RED | GREEN-RED | |
| 3. | + | + | + | - | There is SARS-CoV-2, Influenza type A, Influenza type B antigens presence in sample. There is no RSV antigens presence in the sample. |
| | GREEN-RED | GREEN-RED | GREEN-RED | GREEN | |
| 4. | + | + | - | + | There is SARS-CoV-2, Influenza type A, RSV antigens presence in sample. There is no Influenza type B antigens presence in the sample. |
| | GREEN-RED | GREEN-RED | GREEN | GREEN-RED | |
| 5. | + | - | + | + | There is SARS-CoV-2, Influenza type B, RSV antigens presence in sample. There is no Influenza type A antigens presence in the sample. |
| | GREEN-RED | GREEN | GREEN-RED | GREEN-RED | |
| 6. | - | + | + | + | There is Influenza type A, Influenza type B and RSV antigens presence in sample. There is no SARS-CoV-2 antigens presence in the sample. |
| | GREEN | GREEN-RED | GREEN-RED | GREEN-RED | |
| 7. | + | + | - | - | There is SARS-CoV-2 and Influenza type A antigens presence in sample. There is no Influenza type B and RSV antigens presence in the sample. |
| | GREEN-RED | GREEN-RED | GREEN | GREEN | |
| 8. | - | - | + | + | There is Influenza type B and RSV antigens presence in sample. There is no SARS-CoV-2, Influenza type A antigens presence in the sample. |
| | GREEN | GREEN | GREEN-RED | GREEN-RED | |
| 9. | - | + | - | + | There is influenza type A and RSV antigens presence in sample. There is no SARS-CoV-2, Influenza type B antigens presence in the sample. |
| | GREEN | GREEN-RED | GREEN | GREEN-RED | |
| 10. | - | + | + | - | There is Influenza type A and Influenza type B antigens presence in sample. There is no SARS-CoV-2, RSV antigens presence in the sample. |
| | GREEN | GREEN-RED | GREEN-RED | GREEN | |
| 11. | + | - | + | - | There is SARS-CoV-2 and Influenza type B antigens presence in sample. There is no Influenza type A, RSV antigens presence in the sample. |
| | GREEN-RED | GREEN | GREEN-RED | GREEN | |
| 12. | + | - | - | + | There is SARS-CoV-2 and RSV antigens presence in sample. There is no Influenza type A, Influenza type B antigens presence in the sample. |
| | GREEN-RED | GREEN | GREEN | GREEN-RED | |
| 13. | + | - | - | - | There is SARS-CoV-2 antigens presence in sample. There is no Influenza type A, Influenza type B, RSV antigens presence in the sample. |
| | GREEN-RED | GREEN | GREEN | GREEN | |
| 14. | - | + | - | - | There is Influenza type A antigens presence in sample. There is no SARS-CoV-2, Influenza type B, RSV antigens presence in the sample. |
| | GREEN | GREEN-RED | GREEN | GREEN | |
| 15. | - | - | + | - | There is Influenza type B antigens presence in sample. There is no SARS-CoV-2, Influenza type A, RSV antigens presence in the sample. |
| | GREEN | GREEN | GREEN-RED | GREEN | |
| 16. | - | - | - | + | There is RSV antigens presence in sample. There is no SARS-CoV-2, |





CERTEST SARS-CoV-2 + Flu A + Flu B + RSV

*One Step test to detect SARS-CoV-2, Influenza A, Influenza B and RSV antigens in combo card format/
Prueba combo de un solo paso para detección de SARS-CoV-2, Influenza A, Influenza B y RSV antígenos en formato cassette*

| | GREEN | GREEN | GREEN | GREEN-RED | Influenza type A, Influenza type B antigens presence in the sample. |
|-----|------------------|-------|-------|-----------|--|
| 17. | Any other result | | | | Invalid result: either A, B, C or D, we recommend repeating the assay using the same sample with another test. |

Whatever result detailed in the above-mentioned table (2 to 16) should be followed up with additional confirmatory diagnostic procedures.

Whatever results detailed between 2 and 6 are not very common. Dual simultaneous respiratory infections are more frequent than triple or quadruple respiratory virus infection.

INVALID: Total absence of control coloured lines (GREEN) regardless the appearance or not of the test lines (RED). Insufficient specimen volume, incorrect procedural techniques or deterioration of the reagents are mostly the main reasons for control lines failure. Review the procedure and repeat the assay with a new test. If the symptoms or situation still persists, discontinue using the test kit and contact your local distributor.

NOTES ON THE INTERPRETATION OF RESULTS

The intensity of the red coloured bands in the test lines (T) in the results windows will vary depending on the concentration of antigens present in the specimen. However, neither the quantitative value nor the rate of increase in antigens can be determined by this qualitative test.

QUALITY CONTROL

The CerTest SARS-CoV-2 + Flu A + Flu B + RSV test presents two controls:

Internal control: internal procedural control is included in the test. A green line appearing in the control line (C) in the results window is an internal control, which confirms sufficient specimen volume and correct procedural technique.

External control: Positive control swabs.

EXTERNAL CONTROL

The CerTest SARS-CoV-2 Positive Control is an external quality control for CerTest SARS-CoV-2 + Flu A + Flu B + RSV combo card test. Only for the strip A (SARS-CoV-2).

The CerTest Influenza A Positive Control is an external quality control for CerTest SARS-CoV-2 + Flu A + Flu B + RSV combo card test. Only for the strip B (Influenza A).

The CerTest Influenza B Positive Control is an external quality control for CerTest SARS-CoV-2 + Flu A + Flu B + RSV combo card test. Only for the strip C (Influenza B).

The CerTest RSV Positive Control is an external quality control for CerTest SARS-CoV-2 + Flu A + Flu B + RSV combo card test. Only for the strip D (RSV).

Use those control swabs to check that the extraction reagents and the test are working properly.

Store as packaged in the sealed pouch at 2-30°C. The positive control swab is stable through the expiration date printed on the sealed pouch. The positive control swab must remain in the sealed pouch until use. Do not freeze.

POSITIVE CONTROL PROCEDURE

Allow tests and positive control swabs to reach room temperature (15-30°C) prior to testing. Do not open the package until the performance of the assay.

1. Remove the CerTest SARS-CoV-2 + Flu A + Flu B + RSV combo card test from its sealed bag just before using.
2. The Reagent Respiratory is the same for both positive control swabs and for the samples. Use a separate pipette and testing tube for each control.

CerTest SARS-CoV-2 Positive Control swab procedure


3. Add 20 drops (approx. 670µL) (1) of Reagent Respiratory and immediately introduce the SARS-CoV-2 positive control swab into the testing tube.
4. Mix the solution by rotating the positive control swab forcefully against the side of the testing tube at least 15 seconds. Extract as much liquid as possible from the swab rotating the swab against the side of the tube as the swab is withdrawn (2). Discard the swab.
5. Use a separate pipette and test for each control. Take the sample from the tube with the pipette (3). Close the tube with the plastic cap (4) and dispense 3 drops (approx. 100-120µL) from the pipette into the circular window marked with the letter A (5).
6. Read the result at 10 minutes. Do not read the test result later than 10 minutes.






CERTEST SARS-CoV-2 + Flu A + Flu B + RSV

One Step test to detect SARS-CoV-2, Influenza A, Influenza B and RSV antigens in combo card format/
Prueba combo de un solo paso para detección de SARS-CoV-2, Influenza A, Influenza B y RSV antígenos en formato cassette

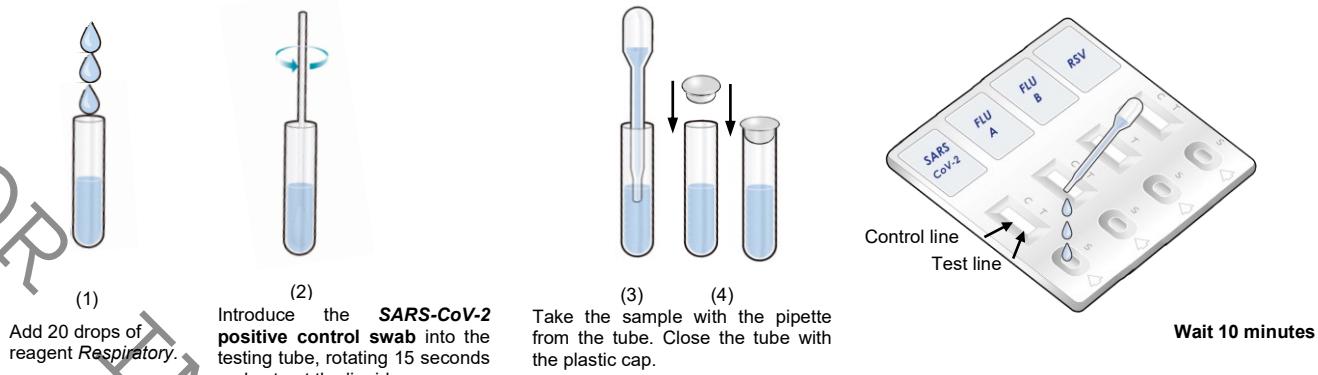


CerTest Influenza A Positive Control swab procedure

- Take the Reagent Respiratory (the same used in the other Positive Control procedure and samples procedure), add 20 drops (approx. 670µL) (6) of Reagent Respiratory into a different testing tube and immediately introduce the **Influenza A Positive Control swab** into the testing tube.
- Mix the solution by rotating the positive control swab forcefully against the side of the testing tube at least 15 seconds. Extract as much liquid as possible from the swab rotating the swab against the side of the tube as the swab is withdrawn (7). Discard the swab.
- Use a separate pipette and test for each control. Take the sample from the tube with the pipette (8). Close the tube with the plastic cap (9) and dispense 3 drops (approx. 100-120µL) from the pipette into the **circular window marked with the letter B** (10).
- Read the result at 10 minutes. Do not read the test result later than 10 minutes.

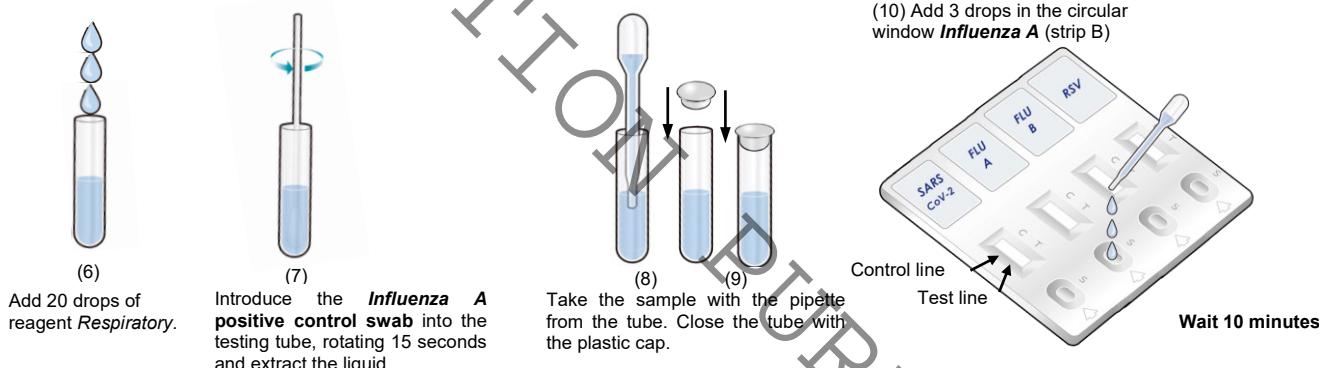

CerTest Influenza B Positive Control swab procedure

- Take the Reagent Respiratory (the same used in the other Positive Control procedure and samples procedure), add 20 drops (approx. 670µL) (11) of Reagent Respiratory into a different testing tube and immediately introduce the **Influenza B Positive Control swab** into the testing tube.
- Mix the solution by rotating the positive control swab forcefully against the side of the testing tube at least 15 seconds. Extract as much liquid as possible from the swab rotating the swab against the side of the tube as the swab is withdrawn (12). Discard the swab.
- Use a separate pipette and test for each control. Take the sample from the tube with the pipette (13). Close the tube with the plastic cap (14) and dispense 3 drops (approx. 100-120µL) from the pipette into the **circular window marked with the letter C** (15).
- Read the result at 10 minutes. Do not read the test result later than 10 minutes.

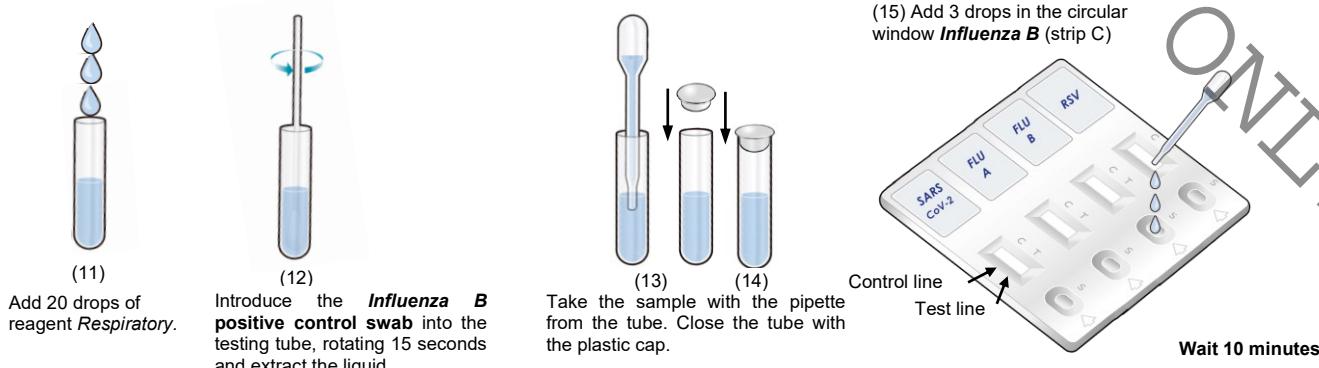




CERTEST SARS-CoV-2 + Flu A + Flu B + RSV

One Step test to detect SARS-CoV-2, Influenza A, Influenza B and RSV antigens in combo card format/
Prueba combo de un solo paso para detección de SARS-CoV-2, Influenza A, Influenza B y RSV antígenos en formato cassette

CerTest RSV Positive Control swab procedure

15. Take the Reagent Respiratory (the same used in the other Positive Control procedure and samples procedure), add 20 drops (approx. 670µL) (11) of Reagent Respiratory into a different testing tube and immediately introduce the **RSV Positive Control swab** into the testing tube.
16. Mix the solution by rotating the positive control swab forcefully against the side of the testing tube at least 15 seconds. Extract as much liquid as possible from the swab rotating the swab against the side of the tube as the swab is withdrawn (12). Discard the swab.
17. Use a separate pipette and test for each control. Take the sample from the tube with the pipette (13). Close the tube with the plastic cap (14) and dispense 3 drops (approx. 100-120µL) from the pipette into the **circular window marked with the letter D** (15).
18. Read the result at 10 minutes. Do not read the test result later than 10 minutes.

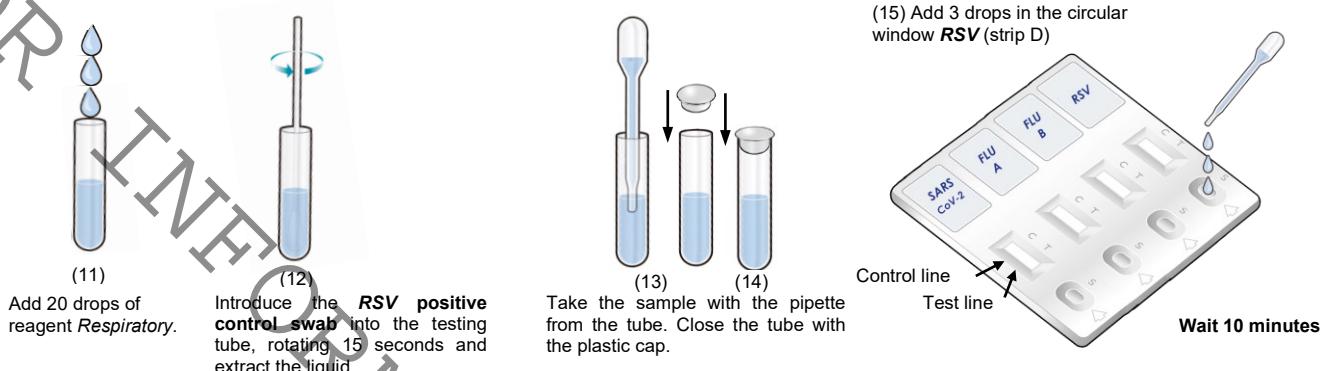

Positive controls could be tested once for each new test kit opened and as otherwise required by your laboratory's standard quality control procedures.

INTERPRETATION POSITIVE CONTROL PROCEDURE

| SARS-CoV-2 Positive Control | Influenza A Positive Control | Influenza B Positive Control | RSV Positive Control | | Interpretation of the results |
|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------|---|
| POSITIVE | | | | | |
| 1. | GREEN-RED | GREEN-RED | GREEN-RED | GREEN-RED | <p>SARS-CoV-2 (A) POSITIVE, Influenza B (B) POSITIVE, Influenza B (C) POSITIVE and RSV (D) POSITIVE: A GREEN line (control line (C)) and a RED line (test line (T)) in the four strips, in the results window, appear at the same time due to presence of antigens in the SARS-CoV-2 Positive Control swab in strip A, presence of antigens in Influenza A Positive Control swab in strip B, presence of antigens in Influenza B Positive Control swab in strip C and presence of antigens in RSV Positive Control swab in strip D.</p> |
| INVALID | | | | | |
| 2. | Any other result | | | | <p>Invalid result, we recommend repeating the assay with another test and positive control swabs.</p> |

RECOMMENDATIONS

Recommendations World Health Organization: Antigen-detection in the diagnosis of SARS-CoV-2 infection using rapid immunoassays- 11 September 2020.

1. To optimize performance, testing should be conducted by trained operators in strict accordance with the test procedure and within the first 5-7 days following the onset of symptoms.





CERTEST SARS-CoV-2 + Flu A + Flu B + RSV

One Step test to detect SARS-CoV-2, Influenza A, Influenza B and RSV antigens in combo card format/
Prueba combo de un solo paso para detección de SARS-CoV-2, Influenza A, Influenza B y RSV antígenos en formato cassette

2. Where possible, all positive samples giving positive results should be transported to laboratories with NAAT (Nucleic Acid Amplification Test) capability for confirmatory testing.
3. This test could be used to screen at-risk individuals and rapidly isolate positive cases in NAAT- confirmed COVID-19 outbreaks.
4. To monitor trends in disease incidence in communities.
5. For early detection and isolation of positive cases in health facilities, where there is widespread community transmission.
6. A negative result cannot completely exclude an active COVID-19 infection, repeat testing or preferably confirmatory testing should be performed (NAAT) whenever possible, particularly in symptomatic patients.
7. Even CerTest SARS-CoV-2 + Flu A + Flu B + RSV test was not validated using samples from asymptomatic contacts of cases, asymptomatic cases have been demonstrated to have viral loads similar to symptomatic cases, so CerTest SARS-CoV-2 + Flu A + Flu B + RSV could detect as positive.

LIMITATIONS

1. The test must be carried out within 2 hours after opening the sealed bag.
2. CerTest SARS-CoV-2 + Flu A + Flu B + RSV should be used only with nasopharyngeal swab samples. The use of swab specimens taken from other sites or the use of other samples such as saliva, sputum or urine has not been established. The quality of the test depends on the quality of the sample; proper nasopharyngeal specimens must be obtained.
3. The intensity of test line may vary from very strong at high antigens concentration to faint when the antigens concentration is close to the detection limit value of the test.
4. Positive results determine the presence of SARS-CoV-2 and/or *Influenza* type A and/or *Influenza* type B and/or *RSV* antigens. A diagnosis of SARS-CoV-2, *Influenza* type A, *Influenza* type B and *RSV* infection should only be made by a physician after all clinical and laboratory findings have been evaluated and must be based in the correlation of the results with further clinical observations.
5. Positive results do not rule out co-infections with other pathogens.
6. Only VTM, UTM and Saline buffer transport media has been validated with CerTest SARS-CoV-2 + Flu A + Flu B + RSV test. When using transport media the test sensitivity can be reduced due to excessive dilution of sample.
7. A negative result is not meaningful because of it is possible the antigens concentration in the nasopharyngeal samples is lower than the detection limit value. If the symptoms or situation still persist, it is recommended that all negative results undergo confirmatory testing using other method and/or virus identification by cell culture, PCR or other technique.

EXPECTED VALUES

On January 30, 2020, the World Health Organization declared COVID-19 a public health emergency of international concern. Since the onset of the pandemic, SARS-CoV-2 has affected millions of people, causing thousands of victims worldwide.

Recent studies have shown that the primary viral infection found in symptomatic patients was identical to that seen in asymptomatic patients, suggesting that COVID-19 patients with asymptomatic infections are capable of transmitting SARS-CoV-2. During the incubation period, asymptomatic patients are also likely to transmit the virus to healthy people.

Although SARS-CoV-2 infection can affect people of any age, children and the elderly with asthma are in a higher risk category for the disease. Those with underlying health problems such as cancer, chronic respiratory diseases, cardiovascular diseases, and diabetes are also reported to have a higher chance of developing serious illnesses.

Multiple viral infections are frequent in hospitalized children with respiratory tract disease (17.4%). Multiple viral infections are linked to higher fever, longer hospital stays and more frequent use of antibiotics than in the case of infants with single *RSV* infections.

Respiratory Syncytial Virus (RSV) is the leading cause of emergency visits and hospitalization for acute lower respiratory tract infections (LRTI) in infants and young children worldwide.

In adults and older, healthy children, the symptoms of *Respiratory Syncytial Virus* are mild and typically mimic the common cold. Self-care measures are usually all that's needed to relieve any discomfort.

Infection with *Respiratory Syncytial Virus* can be severe in some cases, especially in premature babies and infants with underlying health conditions. *RSV* can also become serious in older adults, adults with heart and lung diseases, or anyone with a very weak immune system (immunocompromised).

PERFORMANCE CHARACTERISTICS

Analytical sensitivity (detection limit)

Detection limit value (typical) of CerTest SARS-CoV-2 + Flu A + Flu B + RSV (strip A: SARS-CoV-2) is 1.00 ng/mL of SARS-CoV-2 recombinant protein or 1×10^3 TCID₅₀/mL of 2019nCoV/USA-WA1/2020.





CERTEST SARS-CoV-2 + Flu A + Flu B + RSV

*One Step test to detect SARS-CoV-2, Influenza A, Influenza B and RSV antigens in combo card format/
Prueba combo de un solo paso para detección de SARS-CoV-2, Influenza A, Influenza B y RSV antígenos en formato cassette*

Detection limit value (typical) of CerTest SARS-CoV-2 + Flu A + Flu B + RSV (strip B: *Influenza A*) is 6.25 ng/mL of *Influenza A* recombinant nucleoprotein.

Detection limit value (typical) of CerTest SARS-CoV-2 + Flu A + Flu B + RSV (strip C: *Influenza B*) is 25.00 ng/mL of *Influenza B* recombinant nucleoprotein.

Detection limit value (typical) of CerTest SARS-CoV-2 + Flu A + Flu B + RSV (strip D: *RSV*) is 10.00 ng/mL of *RSV* recombinant protein antigen.

Clinical sensitivity and specificity

Evaluations for SARS-CoV-2 + Flu A + Flu B + RSV (strip A: SARS-CoV-2)

An external evaluation (Hospital Universitario Principe de Asturias, Madrid (Spain)), with nasopharyngeal samples from people suspected of infection by SARS-CoV-2 virus, was performed comparing the results obtained by an immunochromatographic test (CerTest SARS-CoV-2 + Flu A + Flu B + RSV Certest (SARS-CoV-2 strip)) vs qPCR technique (VIASURE). The results were as follows

| IC test: CerTest SARS-CoV-2 + Flu A + Flu B + RSV (SARS-CoV-2) | | qPCR technique | | | Total |
|---|-------|----------------|-----|--|-------|
| | | + | - | | |
| | + | 79 | 0 | | 79 |
| | - | 5 | 150 | | 155 |
| | Total | 84 | 150 | | 234 |

CerTest SARS-CoV-2 + Flu A + Flu B + RSV (SARS-CoV-2) vs qPCR technique

| | Mean Value | 95% confidence interval |
|-----------------|------------|-------------------------|
| Sensitivity (*) | 94.0% | 86.7–98.0% |
| Specificity | 100.0% | 97.6–100.0% |
| PPV | 100.0% | 95.4–100.0% |
| NPV | 96.8% | 92.6–98.9% |

(*) Taking into account the recommendations for *Antigen-detection in the diagnosis of SARS-CoV-2 infection using rapid immunoassays* (11 September 2020) from the WHO, the sensitivity of the test was calculated with nasopharyngeal samples with high viral load (high viral loads is expected in early symptomatic phases of the illness (with the first 5-7 days of illness) in the range of Ag-RDT test detection).

An external evaluation (Laboratoire de Virologie CHU Amiens-Picardie, Amiens (Francia)), with nasopharyngeal samples from people suspected of infection by SARS-CoV-2 virus, was performed comparing the results obtained by an immunochromatographic test (CerTest SARS-CoV-2 + Flu A + Flu B + RSV Certest (SARS-CoV-2 strip)) vs qPCR technique. The results were as follows:

| IC test: CerTest SARS-CoV-2 + Flu A + Flu B + RSV (SARS-CoV-2) | | qPCR technique | | | Total |
|---|-------|----------------|----|--|-------|
| | | + | - | | |
| | + | 88 | 0 | | 88 |
| | - | 8 | 62 | | 70 |
| | Total | 96 | 62 | | 158 |

SARS-CoV-2 + Flu A + Flu B + RSV (SARS-CoV-2) vs qPCR technique

| | Mean Value | 95% confidence interval |
|-----------------|------------|-------------------------|
| Sensitivity (*) | 91.7% | 84.2–96.3% |
| Specificity | 100.0% | 94.2–100.0% |
| PPV | 100.0% | 95.9–100.0% |
| NPV | 88.6% | 78.7–94.9% |





CERTEST SARS-CoV-2 + Flu A + Flu B + RSV

*One Step test to detect SARS-CoV-2, Influenza A, Influenza B and RSV antigens in combo card format/
Prueba combo de un solo paso para detección de SARS-CoV-2, Influenza A, Influenza B y RSV antígenos en formato cassette*

(*) Taking into account the recommendations for *Antigen-detection in the diagnosis of SARS-CoV-2 infection using rapid immunoassays* (11 September 2020) from the WHO, the sensitivity of the test was calculated with nasopharyngeal samples with high viral load (high viral loads is expected in early symptomatic phases of the illness (with the first 5-7 days of illness) in the range of Ag-RDT test detection).

An evaluation, with nasopharyngeal samples from people suspected of infection by SARS-CoV-2 virus, was performed comparing the results obtained by an immunochromatographic test (CerTest SARS-CoV-2 + Flu A + Flu B + RSV Certest (SARS-CoV-2 strip)) vs qPCR technique (VIASURE). The results were as follows:

| IC test: CerTest SARS-CoV-2 + Flu A + Flu B + RSV (SARS-CoV-2) | | qPCR technique | | | Total |
|---|-------|----------------|-----|--|-------|
| | | + | - | | |
| | + | 26 | 1 | | 27 |
| | - | 2 | 233 | | 235 |
| | Total | 28 | 234 | | 262 |

| SARS-CoV-2 + Flu A + Flu B + RSV (SARS-CoV-2) vs qPCR technique | | |
|---|------------|-------------------------|
| | Mean Value | 95% confidence interval |
| Sensitivity (*) | 92.9% | 76.5–99.1% |
| Specificity | 99.6% | 97.6–100.0% |
| PPV | 96.3% | 81.0–99.9% |
| NPV | 99.1% | 97.0–99.9% |

(*) Taking into account the recommendations for *Antigen-detection in the diagnosis of SARS-CoV-2 infection using rapid immunoassays* (11 September 2020) from the WHO, the sensitivity of the test was calculated with nasopharyngeal samples with high viral load (high viral loads is expected in early symptomatic phases of the illness (with the first 5-7 days of illness) in the range of Ag-RDT test detection).

Evaluations for SARS-CoV-2 + Flu A + Flu B + RSV (strip B: Influenza A)

Results showed in tables below have been obtained from several evaluations developed using an immunochromatographic (CerTest SARS-CoV-2 + Flu A + Flu B + RSV (Influenza A), CerTest) and others commercial test kit.

1574 respiratory samples have been used for *Influenza A* evaluation (130 positive samples, 11 false positives, 1402 negatives samples and 31 false negatives). The results were as follows:

| | Evaluation number | True Positives | False Negatives | True Negatives | False Positives |
|--|-------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| CerTest SARS-CoV-2 + Flu A + Flu B + RSV (Influenza A) vs XPECT FLU A&B (Remel) | I | 7 | 0 | 85 | 1 |
| CerTest SARS-CoV-2 + Flu A + Flu B + RSV (Influenza A) vs Instand EQAS program (March 2016) | II | 101 | 26 | 955 | 3 |
| CerTest SARS-CoV-2 + Flu A + Flu B + RSV (Influenza A) vs Binax NOW® Influenza A&B Card (Alere) | III | 11 | 2 | 87 | 0 |
| CerTest SARS-CoV-2 + Flu A + Flu B + RSV (Influenza A) vs SD Bioline, Influenza Ag A/B/A (H1N1) (SD Bioline) | IV | 1 | 0 | 97 | 0 |
| CerTest SARS-CoV-2 + Flu A + Flu B + RSV (Influenza A) vs MariPOC® respi (ArcDia International) | V | 10 | 3 | 178 | 7 |
| | Total | 130 | 31 | 1402 | 11 |

CerTest SARS-CoV-2 + Flu A + Flu B + RSV (Influenza A) vs other test used in evaluation (I, II, III,



CerTest
BIOTEC S.L.

Pol. Industrial Rio Gállego II, Calle J, Nº 1,
50840, San Mateo de Gállego, Zaragoza (SPAIN)
www.certest.es





CERTEST SARS-CoV-2 + Flu A + Flu B + RSV

*One Step test to detect SARS-CoV-2, Influenza A, Influenza B and RSV antigens in combo card format/
Prueba combo de un solo paso para detección de SARS-CoV-2, Influenza A, Influenza B y RSV antígenos en formato cassette*

| IV, V) for Influenza A | | |
|------------------------|------------|-------------------------|
| | Mean Value | 95% confidence interval |
| Sensitivity | 80.7% | 73.8 – 86.5% |
| Specificity | 99.2% | 98.6 – 99.6% |
| PPV | 92.2% | 86.5 – 96.0% |
| NPV | 97.8% | 96.9 – 98.5% |

Evaluations for SARS-CoV-2 + Flu A + Flu B + RSV (strip C: Influenza B)

Results showed in tables below have been obtained from several evaluations developed using an immunochromatographic (CerTest SARS-CoV-2 + Flu A + Flu B + RSV (*Influenza B*), CerTest) and others commercial test kit.

1276 respiratory samples have been used for Influenza B evaluation (75 positive samples, 6 false positives, 1181 negatives samples and 14 false negatives). The results were as follows:

| | Evaluation number | True Positives | False Negatives | True Negatives | False Positives |
|---|-------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| CerTest SARS-CoV-2 + Flu A + Flu B + RSV (<i>Influenza B</i>) vs XPECT FLU A&B (Remel) | I | 7 | 2 | 83 | 1 |
| CerTest SARS-CoV-2 + Flu A + Flu B + RSV (<i>Influenza B</i>) vs Instant EQAS program (March 2016) | II | 63 | 12 | 1005 | 5 |
| CerTest SARS-CoV-2 + Flu A + Flu B + RSV (<i>Influenza B</i>) vs SD Bioline, Influenza Ag A/B/A (H1N1) (SD Bioline) | III | 5 | 0 | 93 | 0 |
| | Total | 75 | 14 | 1181 | 6 |

CerTest SARS-CoV-2 + Flu A + Flu B + RSV (*Influenza B*) vs other test used in evaluation (I, II, III) for Influenza B

| | Mean Value | 95% confidence interval |
|-------------|------------|-------------------------|
| Sensitivity | 84.3% | 75.0 – 91.1% |
| Specificity | 99.5% | 98.9 – 99.8% |
| PPV | 92.6% | 84.6 – 97.2% |
| NPV | 98.8% | 98.0 – 99.4% |

Evaluations for SARS-CoV-2 + Flu A + Flu B + RSV (strip D: RSV)

The evaluation, was performed comparing the results obtained by an immunochromatographic test (CerTest SARS-CoV-2 + Flu A + Flu B + RSV, Certest) (RSV strip) and others commercial available immunochromatographic test BinaxNOW® RSV (Alere). The results were as follows:

| IC test: CerTest SARS-CoV-2+ Flu A + Flu B + RSV (RSV) | IC test: BinaxNOW® RSV | | | | Total |
|---|------------------------|----|----|----|-------|
| | + | + | - | | |
| | | 18 | 0 | 18 | |
| | - | 1 | 10 | 11 | |
| | Total | 19 | 10 | 29 | |

CerTest SARS-CoV-2 + Flu A + Flu B + RSV (RSV) vs BinaxNOW® RSV

| | Mean Value | 95% confidence interval |
|-------------|------------|-------------------------|
| Sensitivity | 94.7% | 74.0–99.9% |
| Specificity | 100.0% | 69.2–100.0% |





CERTEST SARS-CoV-2 + Flu A + Flu B + RSV

*One Step test to detect SARS-CoV-2, Influenza A, Influenza B and RSV antigens in combo card format/
Prueba combo de un solo paso para detección de SARS-CoV-2, Influenza A, Influenza B y RSV antígenos en formato cassette*

| | | |
|-----|--------|-------------|
| PPV | 100.0% | 81.5–100.0% |
| NPV | 90.9% | 58.7-99.8% |

The results showed a high sensitivity and specificity to detect SARS-CoV-2, *Influenza* type A, *Influenza* type B and RSV using CerTest SARS-CoV-2 + *Flu A + Flu B + RSV*.

Hook Effect

CerTest SARS-CoV-2 + *Flu A + Flu B + RSV* test does not show inhibitory hook effect at concentration higher than 100,000xLoD for Strip A: SARS-CoV-2, at concentrations higher than 30,000xLoD for Strip B: *Influenza A*, at concentrations higher than 8,000xLoD for Strip C: *Influenza B* and at concentrations higher than 39,000xLoD for Strip D: RSV.

Cross reactivity

An evaluation was performed to determine the cross reactivity of CerTest SARS-CoV-2 + *Flu A + Flu B + RSV*; no cross reactivity against organisms, pathogens, substances that cause infections:

For Strip A. SARS-CoV-2

| | | | |
|--|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Adenovirus | <i>Cryptosporidium parvum</i> | <i>Influenza</i> type B | <i>Salmonella typhi</i> |
| Astrovirus | <i>Entamoeba histolytica</i> | <i>Legionella pneumophila</i> | <i>Salmonella typhimurium</i> |
| Bovine Haemoglobin | <i>Escherichia coli O157</i> | <i>Listeria monocytogenes</i> | <i>Shigella boydii</i> |
| <i>Campylobacter jejuni</i> | <i>Giardia</i> | <i>Norovirus GI</i> | <i>Shigella dysenteriae</i> |
| <i>Clostridium difficile antigen GDH</i> | <i>Helicobacter pylori</i> | <i>Norovirus GII</i> | <i>Shigella flexneri</i> |
| <i>Clostridium difficile Toxin A</i> | <i>Human Calprotectin</i> | <i>Pig Haemoglobin</i> | <i>Shigella sonnei</i> |
| <i>Clostridium difficile Toxin B</i> | <i>Human Haemoglobin</i> | <i>Rotavirus</i> | <i>Streptococcus pneumoniae</i> |
| <i>Coronavirus strain 229E</i> | <i>Human Lactoferrin</i> | <i>Respiratory Syncytial Virus</i> | <i>Streptococcus pyogenes</i> |
| <i>Coronavirus strain NL63</i> | <i>Human Transferrin</i> | <i>Salmonella enteritidis</i> | <i>Yersinia Enterocolitica O:3</i> |
| <i>Coronavirus strain OC43</i> | <i>Influenza</i> type A | <i>Salmonella paratyphi A</i> | <i>Yersinia Enterocolitica O:9</i> |

Five positive samples for Human coronavirus HKU1 were tested in an external evaluation carried out with CerTest SARS-CoV-2 + *Flu A + Flu B + RSV* (SARS-CoV-2, strip A) test and the results obtained were negative. This suggest that there is no cross reactivity with HKU1. In addition, even though the percentage identity of the nucleocapsid protein sequence of HKU1 with the nucleocapsid protein sequence of SARS-CoV-2 is about 35% that is considered as very low homology. This suggest that there is no cross reactivity with HKU1.

Three positive samples for Rhinovirus were tested in an external evaluation carried out with CerTest SARS-CoV-2 + *Flu A + Flu B + RSV* (SARS-CoV-2, strip A) test and the results obtained were negative. This suggest that there is no cross reactivity with Rhinovirus

CerTest SARS-CoV-2 + *Flu A + Flu B + RSV* (SARS-CoV-2, strip A) showed some cross reaction with SARS and very low with MERS.

For Strip B. Influenza A

| | | | |
|--|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Adenovirus | <i>Coronavirus strain OC43</i> | <i>Legionella pneumophila</i> | <i>Salmonella typhi</i> |
| Astrovirus | <i>Entamoeba histolytica</i> | <i>Listeria monocytogenes</i> | <i>Salmonella typhimurium</i> |
| Bovine Haemoglobin | <i>Escherichia coli O157</i> | <i>MERS</i> | <i>Shigella boydii</i> |
| <i>Campylobacter jejuni</i> | <i>Giardia</i> | <i>Norovirus GI</i> | <i>Shigella dysenteriae</i> |
| <i>Clostridium difficile antigen GDH</i> | <i>Helicobacter pylori</i> | <i>Norovirus GII</i> | <i>Shigella flexneri</i> |
| <i>Clostridium difficile Toxin A</i> | <i>Human Calprotectin</i> | <i>Pig Haemoglobin</i> | <i>Shigella sonnei</i> |
| <i>Clostridium difficile Toxin B</i> | <i>Human Haemoglobin</i> | <i>Rotavirus</i> | <i>Streptococcus pneumoniae</i> |
| <i>Coronavirus SARS-1 (SARS)</i> | <i>Human Lactoferrin</i> | <i>Respiratory Syncytial Virus</i> | <i>Streptococcus pyogenes</i> |
| <i>Coronavirus SARS-2 (SARS-CoV-2)</i> | <i>Human Transferrin</i> | <i>Salmonella enteritidis</i> | <i>Yersinia Enterocolitica O:3</i> |
| <i>Coronavirus strain 229E</i> | <i>Influenza</i> type B | <i>Salmonella paratyphi A</i> | <i>Yersinia Enterocolitica O:9</i> |
| <i>Coronavirus strain NL63</i> | | | |

For Strip C. Influenza B

| | | | |
|--------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Adenovirus | <i>Coronavirus strain OC43</i> | <i>Legionella pneumophila</i> | <i>Salmonella typhi</i> |
| Astrovirus | <i>Entamoeba histolytica</i> | <i>Listeria monocytogenes</i> | <i>Salmonella typhimurium</i> |
| Bovine Haemoglobin | <i>Escherichia coli O157</i> | <i>MERS</i> | <i>Shigella boydii</i> |





CERTEST SARS-CoV-2 + Flu A + Flu B + RSV

One Step test to detect SARS-CoV-2, Influenza A, Influenza B and RSV antigens in combo card format/
Prueba combo de un solo paso para detección de SARS-CoV-2, Influenza A, Influenza B y RSV antígenos en formato cassette

| | | | |
|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Campylobacter jejuni | Giardia | Norovirus GI | Shigella dysenteriae |
| Clostridium difficile antigen GDH | Helicobacter pylori | Norovirus GII | Shigella flexneri |
| Clostridium difficile Toxin A | Human Calprotectin | Pig Haemoglobin | Shigella sonnei |
| Clostridium difficile Toxin B | Human Haemoglobin | Rotavirus | Streptococcus pneumoniae |
| Coronavirus SARS-1 (SARS) | Human Lactoferrin | Respiratory Syncytial Virus | Streptococcus pyogenes |
| Coronavirus SARS-2 (SARS-CoV-2) | Human Transferrin | Salmonella enteritidis | Yersinia Enterocolitica O:3 |
| Coronavirus strain 229E | Influenza type A | Salmonella paratyphi A | Yersinia Enterocolitica O:9 |
| Coronavirus strain NL63 | | | |

For Strip D. RSV

| | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Adenovirus | Coronavirus strain OC43 | Legionella pneumophila | Salmonella typhimurium |
| Astrovirus | Entamoeba histolytica | Listeria monocytogenes | Shigella boydii |
| Bovine Haemoglobin | Escherichia coli O157 | MERS | Shigella dysenteriae |
| Campylobacter jejuni | Giardia | Norovirus GI | Shigella flexneri |
| Clostridium difficile antigen GDH | Helicobacter pylori | Norovirus GII | Shigella sonnei |
| Clostridium difficile Toxin A | Human Calprotectin | Pig Haemoglobin | Streptococcus pneumoniae |
| Clostridium difficile Toxin B | Human Haemoglobin | Rotavirus | Streptococcus pyogenes |
| Coronavirus SARS-1 (SARS) | Human Lactoferrin | Salmonella enteritidis | Yersinia Enterocolitica O:3 |
| Coronavirus SARS-2 (SARS-CoV-2) | Human Transferrin | Salmonella paratyphi A | Yersinia Enterocolitica O:9 |
| Coronavirus strain 229E | Influenza type A | Salmonella typhi | |
| Coronavirus strain NL63 | Influenza type B | | |

Interferences

An evaluation was performed to determine the possible interferences of CerTest SARS-CoV-2 + Flu A + Flu B + RSV; no interferences against the substances tested were detected:

| Potencial interfering substance | Concentration | Results | Potencial interfering substance | Concentration | Results |
|------------------------------------|----------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------|----------|
| Metronidazole | 3.0 mg/mL | Negative | Loperamide hydrochloride (Fortasec) | 0.15 mg/mL | Negative |
| Ampicillin | 3.0 mg/mL | Negative | Heparin (Hibor) | 350.0 IU/mL | Negative |
| Oseltamivir | 3.0·10 ⁻² mg/mL | Negative | Almagato (Almax) | 3.0 mg/mL | Negative |
| Amantadine | 0.3 mg/mL | Negative | Fosfamycin (Monurol) | 3.0·10 ⁻³ mg/mL | Negative |
| Ribavirin | 3.0 mg/mL | Negative | Acetylcysteine (Flumucil) | 3.0·10 ⁻² mg/mL | Negative |
| Codeine (Toseina) | 0.2 mg/mL | Negative | Dexketoprofen trometamol (Enantyum) | 0.3 mg/mL | Negative |
| Benzocaine (Angileptol) | 3.0·10 ⁻² mg/mL | Negative | Levofloxacin | 3.0·10 ⁻² mg/mL | Negative |
| Cloperastine (Flutox) | 0.3 mg/mL | Negative | Ciprofloxacin | 0.3 mg/mL | Negative |
| Carbocisteína (Iniston mucolítico) | 3.0·10 ⁻² mg/mL | Negative | Rifampicin (Rifaldin) | 0.3 mg/mL | Negative |
| Loratadine | 0.3 mg/mL | Negative | Phenoxyethylpenicillín potassium | 3.0 mg/mL | Negative |
| Dexchloropheniramine (Polaramine) | 0.3 mg/mL | Negative | Ambroxol hydrochloride (Mucosan) | 0.3 mg/mL | Negative |
| Ebastine (Ebaste) | 3.0 mg/mL | Negative | Macrogol 3350 (Movicol) | 3.0 mg/mL | Negative |
| Acetyl Salicylic (Adiro) | 0.3 mg/mL | Negative | Lysine Carbocisteína (Pectox) | 3.0·10 ⁻² mg/mL | Negative |
| Ibuprofen (Epidifen) | 0.3 mg/mL | Negative | Hydroxyzine dihydrochloride | 0.3 mg/mL | Negative |
| Paracetamol (Dolocatil) | 5.0 mg/mL | Negative | Lorazepam | 3.0·10 ⁻³ mg/mL | Negative |
| Metamizole (Nolotil) | 5.0 mg/mL | Negative | Amoxicillin | 3.0 mg/mL | Negative |
| Prednisone | 0.3 mg/mL | Negative | Mercaptopurine | 0.3 mg/mL | Negative |
| Omeprazole | 2.0·10 ⁻³ mg/mL | Negative | Biotine | 100.0 µg/mL | Negative |
| Human haemoglobin | 5.0 µg/mL | Negative | Human lactoferrin | 5.0 µg/mL | Negative |
| Human transferrin | 0.5 µg/mL | Negative | Mucine | 5.0 mg/mL | Negative |
| Human calprotectin | 5.0 µg/mL | Negative | Human blood | 50.0 mg/mL | Negative |





CERTEST SARS-CoV-2 + Flu A + Flu B + RSV

One Step test to detect SARS-CoV-2, Influenza A, Influenza B and RSV antigens in combo card format/
Prueba combo de un solo paso para detección de SARS-CoV-2, Influenza A, Influenza B y RSV antígenos en formato cassette

ESPAÑOL

USO PREVISTO

CerTest SARS-CoV-2 + Flu A + Flu B + RSV combo card test es una prueba inmunocromatográfica de un solo paso para la detección cualitativa simultánea de nucleoproteína de SARS-CoV-2, *Influenza* tipo A, *Influenza* tipo B, *Virus respiratorio sincítial* a partir de muestras de hisopos nasofaríngeos procedentes de pacientes sospechosos de infección por COVID-19, *Influenza* tipo A, *Influenza* tipo B y *Virus Respiratorio Sincítial (RSV)*.

CerTest SARS-CoV-2 + Flu A + Flu B + RSV combo card test ofrece un ensayo de cribado sencillo y de alta sensibilidad como ayuda en el diagnóstico de infección causada por SARS-CoV-2, *Influenza* tipo A y B y *RSV*.

INTRODUCCIÓN

Una neumonía invisible se propagó rápidamente en Wuhan, China, en diciembre de 2019. Los científicos secuenciaron y reconocieron un nuevo coronavirus β. La enfermedad, causada por el virus corona del síndrome respiratorio agudo severo 2 (SARS-CoV-2), se denomina enfermedad de coronavirus 2019 (COVID-19).

Los coronavirus (CoV) son ARN, virus envueltos, con un genoma grande (29,9 kb), entre los que los β-CoV y α-CoV pueden infectar a los mamíferos. Los virus que pertenecen a la familia Coronaviridae tienen la proteína de membrana (M) más abundante entre otras proteínas, es decir, la glicoproteína de pico (S), la proteína de la nucleocápside (N) y una proteína de la envoltura (E). La glicoproteína de pico (S) es uno de los objetivos de la respuesta de las células T en el sistema inmunológico. La proteína S también promueve la unión de la envoltura del virus al receptor ACE2 y la entrada del virus en la célula diana. Los receptores ACE2 están presentes en las células de las arterias, venas, músculos lisos, intestino delgado, alvéolos de los pulmones, folículos pilosos, miofibroblastos cardíacos, piel, cerebro y riñón, por lo que el SARS-CoV-2 podría potencialmente infectar estos tejidos.

Las formas clínicas de esta enfermedad comprenden desde síntomas leves hasta muy graves: la neumonía, la fiebre y los síntomas respiratorios son los más frecuentes. Otros síntomas de la infección viral incluyen dolor de garganta, molestias, dolores y dificultad para respirar. En algunos casos, también se presenta secreción nasal, náuseas y diarrea.

El brote de coronavirus recién descubierto comienza principalmente a través de secreciones nasales o gotitas de saliva, una vez que un individuo infectado estornuda o tose, y el tiempo estimado de incubación es de 2 semanas. Debido a la alta tasa de infección del SARS-CoV-2, la detección de pacientes positivos asintomáticos es probablemente uno de los puntos clave para controlar el brote.

La gripe está causada por un virus (*Influenza*) que ataca principalmente el tracto respiratorio superior-nariz, garganta y bronquios y también aunque más raramente a los pulmones. La infección normalmente dura una semana. Está caracterizada en su inicio por fiebre elevada, mialgia, dolores de cabeza y gran malestar, tos no productiva, dolor de garganta y rinitis. La mayoría de la gente se recupera en una o dos semanas sin requerir ningún tratamiento médico. Para los niños, ancianos y personas que padecen afecciones pulmonares, diabetes, cáncer, afecciones de riñón o problemas de corazón, *Influenza* puede ocasionar un riesgo serio. En estas personas esta infección puede provocar graves complicaciones de otras enfermedades, neumonía y muerte.

Normalmente los virus de *Influenza* que causan enfermedad en humanos se dividen en dos grupos: A y B. *Influenza* A tienen 2 subtipos que son importantes para humanos: A (H3N2) y A (H1N1), de los cuales el primero es el que está directamente asociado a la mayor parte de las muertes. Los virus de *Influenza* se caracterizan por 2 componentes proteicos diferentes, conocidos como antígenos, localizados en la superficie del virus, llamados hemaglutinina (H) y neuraminidasa (N).

El *Virus Respiratorio Sincítial (RSV)* es uno de los principales causantes de la bronquiolitis y de la neumonía en niños menores de 1 año. La enfermedad suele comenzar con fiebre, resfriado, tos y con respiración ruidosa. La enfermedad cuando afecta al tracto respiratorio inferior suele ser grave y puede afectar especialmente a personas ancianas o aquellas con problemas cardíacos, pulmonares o del sistema inmune. RSV se contagia a partir de las secreciones respiratorias por contacto directo con personas infectadas o indirecto con superficies u objetos contaminados.

FUNDAMENTO DEL TEST

CerTest SARS-CoV-2 + Flu A + Flu B + RSV combo card test es una prueba inmunocromatográfica de un solo paso para la detección cualitativa simultánea de nucleoproteína de SARS-CoV-2, *Influenza* tipo A, *Influenza* tipo B, *Virus respiratorio sincítial* a partir de muestras de hisopos nasofaríngeos procedentes de pacientes sospechosos de infección por COVID-19, *Influenza* tipo A, *Influenza* tipo B y *Virus Respiratorio Sincítial (RSV)*.

Tira A consiste en una membrana de nitrocelulosa fijada previamente con anticuerpos monoclonales de ratón frente a SARS-CoV-2 en la línea de test (T), en la ventana de resultados, y en la línea de control (C), con anticuerpos policlonales de conejo frente a una proteína específica. En el material absorbente para la muestra se han dispensado una preparación de reactivos para la línea de test (anticuerpos monoclonales de



CerTest
BIOTEC S.L.

Pol. Industrial Rio Gállego II, Calle J, Nº 1,
50840, San Mateo de Gállego, Zaragoza (SPAIN)
www.certest.es





CERTEST SARS-CoV-2 + Flu A + Flu B + RSV

One Step test to detect SARS-CoV-2, Influenza A, Influenza B and RSV antigens in combo card format/
Prueba combo de un solo paso para detección de SARS-CoV-2, Influenza A, Influenza B y RSV antígenos en formato cassette

ratón frente a SARS-CoV-2) conjugada con látex de poliestireno rojo y otra preparación para la línea de control (proteína específica de unión) conjugada con látex de poliestireno verde, formando dos complejos coloreados conjugados.

Tira B consiste en una membrana de nitrocelulosa fijada previamente con anticuerpos monoclonales de ratón frente a *Influenza* tipo A en la línea de test (T), en la ventana de resultados, y en la línea de control (C), con anticuerpos policlonales de conejo frente a una proteína específica. En el material absorbente para la muestra se han dispensado una preparación de reactivos para la línea de test (anticuerpos monoclonales de ratón frente a *Influenza* tipo A) conjugada con látex de poliestireno rojo y otra preparación para la línea de control (proteína específica de unión) conjugada con látex de poliestireno verde, formando dos complejos coloreados conjugados.

Tira C consiste en una membrana de nitrocelulosa fijada previamente con anticuerpos monoclonales de ratón frente a *Influenza* tipo B en la línea de test (T), en la ventana de resultados, y en la línea de control (C), con anticuerpos policlonales de conejo frente a una proteína específica. En el material absorbente para la muestra se han dispensado una preparación de reactivos para la línea de test (anticuerpos monoclonales de ratón frente a *Influenza* tipo B) conjugada con látex de poliestireno rojo y otra preparación para la línea de control (proteína específica de unión) conjugada con látex de poliestireno verde, formando dos complejos coloreados conjugados.

Tira D consiste en una membrana de nitrocelulosa fijada previamente con anticuerpos monoclonales de ratón frente a RSV en la línea de test (T), en la ventana de resultados, y en la línea de control (C), con anticuerpos policlonales de conejo frente a una proteína específica. En el material absorbente para la muestra se han dispensado una preparación de reactivos para la línea de test (anticuerpos monoclonales de ratón frente a RSV) conjugada con látex de poliestireno rojo y otra preparación para la línea de control (proteína específica de unión) conjugada con látex de poliestireno verde, formando dos complejos coloreados conjugados.

Si la muestra es SARS-CoV-2 positiva, los antígenos de la muestra diluida reaccionan con el complejo conjugado coloreado rojo (anticuerpos monoclonales anti-SARS-CoV-2-microesferas rojas de látex) en la tira A, si la muestra es *Influenza* A positiva, los antígenos de la muestra diluida reaccionan con el complejo conjugado coloreado rojo (anticuerpos monoclonales anti- *Influenza* tipo A-microesferas rojas de látex) en la tira B, si la muestra es *Influenza* B positiva, los antígenos de la muestra diluida reaccionan con el complejo conjugado coloreado rojo (anticuerpos monoclonales anti-*Influenza* tipo B-microesferas rojas de látex) en la tira C, y si la muestra es RSV positiva, los antígenos de la muestra diluida reaccionan con el complejo conjugado coloreado rojo (anticuerpos monoclonales anti-RSV-microesferas rojas de látex) en la tira D, los cuales han sido secados previamente en el material absorbente. Esta mezcla avanza por capilaridad a través de la membrana. Conforme la muestra va migrando también lo hacen los complejos conjugados. Los anticuerpos anti-SARS-CoV-2 presentes en la membrana de la tira A (línea de test), anti-*Influenza* tipo A presentes en la membrana de la tira B (línea de test) y los anticuerpos anti- *Influenza* tipo B presentes en la membrana de la tira C (línea de test), y los anticuerpos anti-RSV presentes en la membrana de la tira D (línea de test) capturarán el complejo coloreado del test y una línea roja aparecerá en las tiras. Estas líneas se usarán para interpretación del resultado.

Si la muestra es negativa, no presenta antígenos de SARS-CoV-2 ni de *Influenza* tipo A ni de *Influenza* tipo B ni de RSV o los antígenos están presentes en una concentración inferior al límite de detección y no se produce reacción con ningún complejo coloreado rojo. Los anticuerpos anti-SARS-CoV-2, anti-*Influenza* tipo A, anti-*Influenza* tipo B y anti-RSV presentes en las membranas (líneas de test) no capturarán el antígeno-complejo coloreado rojo (no formado) y no aparecerán las líneas rojas.

Independientemente de que la muestra sea positiva o no, en ambas tiras, la mezcla continuará moviéndose a través de las membranas hacia los anticuerpos inmovilizados frente a la proteína específica localizados en las líneas de control. Estos anticuerpos anti-proteína específica presentes en ambas membranas capturarán el complejo conjugado de control y las líneas de control verdes siempre aparecerán. La aparición de estas líneas se utiliza: 1) para verificar que se ha añadido el volumen de muestra suficiente, 2) que el flujo ha sido apropiado y 3) como control interno de los reactivos.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

El producto debe ser almacenado entre 2 y 30°C en su envase original sellado, para conseguir un óptimo funcionamiento hasta la fecha de caducidad impresa en el envase. No debe abrirse hasta el momento de su uso. No congelar.

PRECAUCIONES

- Sólo para uso profesional in vitro.
- No utilizar después de la fecha de caducidad.
- Las muestras se deben considerar potencialmente peligrosas (especialmente las muestras procedentes de pacientes sospechosos de infección por SARS-CoV-2) y deben ser manipuladas de la misma forma que a un agente infeccioso. Un nuevo test deberá utilizarse para cada una de las muestras para evitar errores de contaminación.
- Utilice prácticas adecuadas de control de infecciones al recolectar y manipular las muestras. Estas prácticas deben incluir, pero no se limitan a, equipo de protección personal (EPP), bata de laboratorio, mascarilla quirúrgica u otro tipo de máscara que se considere apropiada,





CERTEST SARS-CoV-2 + Flu A + Flu B + RSV

One Step test to detect SARS-CoV-2, Influenza A, Influenza B and RSV antigens in combo card format/
Prueba combo de un solo paso para detección de SARS-CoV-2, Influenza A, Influenza B y RSV antígenos en formato cassette

guantes desechables y protección para los ojos. Siga las reglamentaciones locales o nacionales sobre la recolección y manipulación de muestras.

- Los tests (hisopos, tubitos, pipetas, hisopos control positivo y carcasa), deben ser desechados en un contenedor adecuado de bioseguridad después de ser usados. Estos contenedores deben desecharse de acuerdo con las leyes o regulaciones locales o nacionales.
- Limpiar los posibles derrames con un desinfectante adecuado.
- Los reactivos contienen conservantes. Debe evitarse cualquier contacto con la piel o las mucosas. Consultar fichas de seguridad, disponibles bajo petición.
- Los componentes proporcionados con el kit son aprobados para su uso con CerTest SARS-CoV-2 + Flu A + Flu B + RSV test. No se deben usar con componentes de otros kits comercializados.
- Los hisopos estériles suministrados en los kits deben ser usados solamente para la toma de muestra nasofaríngea. No pueden reutilizarse.
- No tocar la cabeza del hisopo estéril suministrado cuando se saque de su envase primario para evitar contaminación.
- La presencia de líneas amarillentas en la ventana de resultados (zona línea de control y zona línea de test), antes de utilizar el test, es completamente normal y no supone fallo de funcionalidad del test.
- Todos los resultados positivos deberían procesarse siguiendo las leyes y regulaciones locales.

RECOGIDA DE MUESTRAS Y PREPARACIÓN


Las muestras deben ser procesadas lo antes posible tras su recolección. Siga las prácticas adecuadas de control de infecciones. Si esto no fuera posible las muestras pueden ser almacenadas en el frigorífico (2-8°C) como máximo 8 horas antes de realizar la prueba. Si las muestras son conservadas en los medios de transporte validados (VTM, UTM o Buffer salino) podrían conservarse hasta 6 horas a temperatura ambiente o en nevera (2-8°C).

Preparación de la muestra (ver dibujo):

Método de hisopo nasofaríngeo:

1. Sacar el hisopo de su envase.
2. Tomar la muestra con un hisopo estéril a partir de un orificio nasal.
3. Introducir el hisopo dentro del orificio hacia la nasofaringe, rotando contra la pared.
(asegurarse de que el hisopo contenga células, así como mocos). Sacar el hisopo del orificio nasal cuidadosamente.
4. Considerar repetir el procedimiento con el otro orificio nasal solo si el protocolo del profesional que toma la muestra lo requiere.
5. Procesar el hisopo tan pronto como sea posible tras la recolección de la muestra.

Seguir apartado de Procedimiento (muestras).

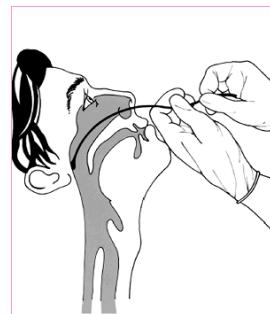

Toma de muestra

Muestras nasofaríngeas previamente extraídas en medio de transporte:

Incluso cuando el uso de muestras directas de hisopo nasofaríngeo es el protocolo preferido a seguir, el test puede ser utilizado con hisopos de muestras nasofaríngeas previamente diluidas en medios de transporte como: VTM, UTM o Bufer salino.

1. Utilizar el mínimo volumen de medio de transporte para evitar pérdidas en la sensibilidad. Ejemplo: 1.0 mL. El uso de mayores volúmenes afecta a la sensibilidad del sistema.
2. Diluir las muestras extraídas 1:1 en el reactivo *Respiratory* (diluyente de muestra) suministrado en el kit.

Seguir inmediatamente con el punto 3 del apartado Procedimiento (muestras).

MATERIALES

MATERIALES SUMINISTRADOS

- CerTest SARS-CoV-2 + Flu A + Flu B + RSV combo card tests
- Reactivo *Respiratory* (diluyente de muestra y controles)
- Hisopos estériles
- Pipetas desechables
- Tubos de ensayo
- Instrucciones de uso
- Tapones de plástico
- Gradilla de laboratorio
- CerTest SARS-CoV-2 Positive Control

MATERIALES NECESARIOS NO SUMINISTRADOS

- Guantes desechables (otros equipos de protección personal que se consideren necesarios).
- Cronómetro





CERTEST SARS-CoV-2 + Flu A + Flu B + RSV

One Step test to detect SARS-CoV-2, Influenza A, Influenza B and RSV antigens in combo card format/
Prueba combo de un solo paso para detección de SARS-CoV-2, Influenza A, Influenza B y RSV antígenos en formato cassette

- CerTest Influenza A Positive Control
- CerTest Influenza B Positive Control
- CerTest RSV Positive Control


PROCEDIMIENTO (MUESTRAS)

Siga las prácticas adecuadas de control de infecciones. Previamente los tests y las muestras se deben acondicionar a la temperatura ambiente (15-30°C). No abrir los envases hasta el momento de la prueba.

1. Poner los tubos en la gradilla de laboratorio (identificar adecuadamente las muestras de los diferentes pacientes). Añadir 20 gotas (aprox. 670µL) (1) del Reactivo Respiratory y poner inmediatamente el hisopo dentro del tubo.
2. Mezclar y homogeneizar haciendo rotar el hisopo contra las paredes del tubo para permitir que se mezcle la solución, durante 15 segundos (2). Se obtendrán mejores resultados si la muestra es mezclada vigorosamente para extraer la máxima cantidad del líquido del hisopo evitando salpicaduras y aerosoles. Rotar el hisopo contra las paredes del tubo mientras se retira del tubo para extraer la mayor cantidad de líquido posible. Tirar el hisopo.
3. Sacar el test CerTest SARS-CoV-2 + Flu A + Flu B + RSV de su envase en el momento antes de utilizarlo.
4. Usar una pipeta y un test diferente para cada muestra. Tomar la muestra del tubo de ensayo con la pipeta (3). Cerrar el tubo con el tapón (4) y dispensar 3 gotas (aprox. 100-120µL) con la pipeta en la ventana circular marcada con la letra A (3), añadir 3 gotas (aprox.120µL), con el mismo tubo, en la ventana circular marcada con la letra B (4), usando el mismo tubo y pipeta, en la ventana circular marcada con la letra B (4), dispensar 3 gotas (aprox. 100-120µL), usando el mismo tubo y pipeta, en la ventana circular marcada con la letra C (5) y dispensar 3 gotas (aprox. 100-120µL), usando el mismo tubo y pipeta, en la ventana circular marcada con la letra D (6).
5. Leer el resultado a los 10 minutos. No leer el resultado superados los 10 minutos.

Si se diera el caso de que el test no corre (significa que el líquido -muestras+diluyente- no avanza a través de la tira -zona de reacción o ventana de resultados- debido al tipo de muestra), mezclar el líquido añadido en la ventana de muestra (S) con la pipeta. Si el test siguiera sin correr, añadir una gota de Reactivo Respiratory hasta que se vea correr el líquido por la zona de reacción.

El diluyente de muestra (Reactivo Respiratory) tiene capacidad de inactivar al SARS-CoV-2: 99.68% después de 1 minuto y 99.98% después de 10 minutos.

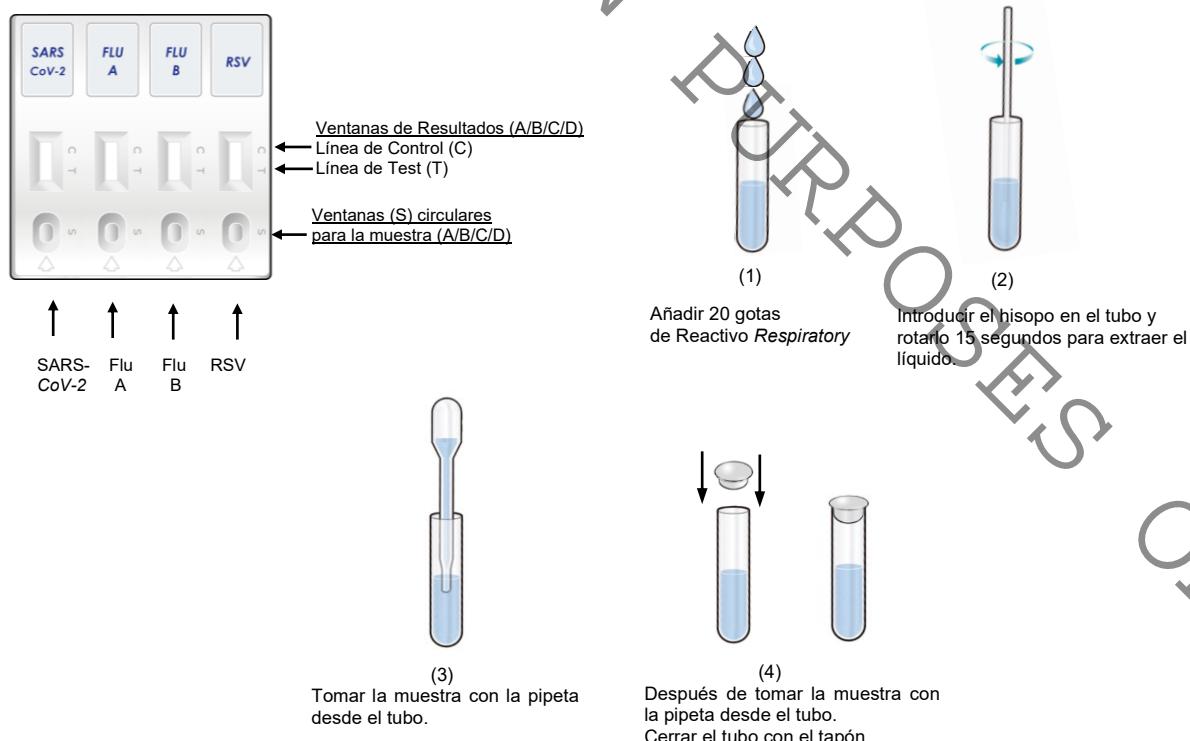


CERTEST SARS-CoV-2 + Flu A + Flu B + RSV

One Step test to detect SARS-CoV-2, Influenza A, Influenza B and RSV antigens in combo card format/
Prueba combo de un solo paso para detección de SARS-CoV-2, Influenza A, Influenza B y RSV antígenos en formato cassette


Procedimiento para la tira A de SARS-CoV-2

Añadir 3 gotas en la Ventana circular (A)

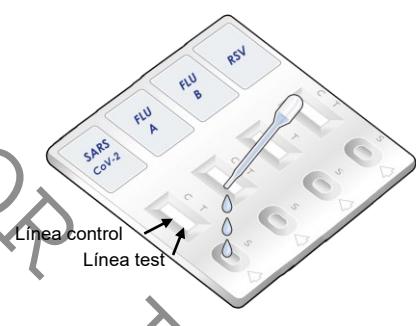


Procedimiento para la tira B de Influenza A

Añadir 3 gotas en la Ventana circular (B)

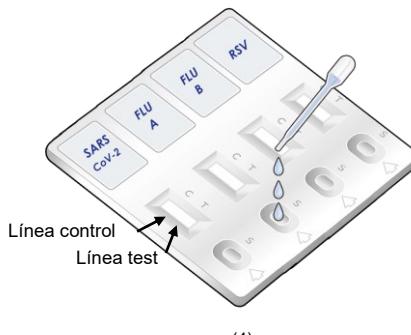


Procedimiento para la tira C de Influenza B

Añadir 3 gotas en la Ventana circular (C)

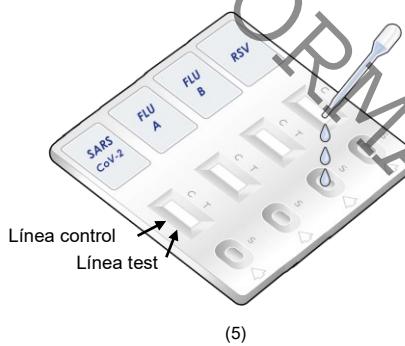


Procedimiento para la tira D de RSV

Añadir 3 gotas en la Ventana circular (D)

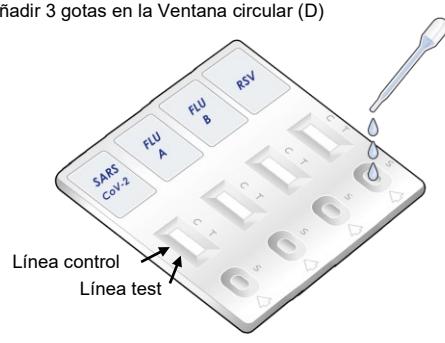


INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS (por favor, fíjese en el siguiente dibujo)


RESULTADOS VÁLIDOS

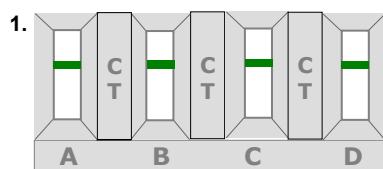


- A: Verde → Negativo SARS-CoV-2
- B: Verde → Negativo FLU A
- C: Verde → Negativo FLU B
- D: Verde → Negativo RSV

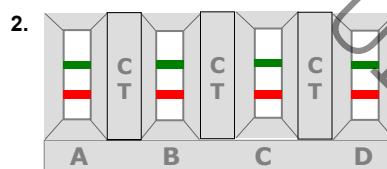


- A: Verde/Rojo → Positivo SARS-CoV-2
- B: Verde/Rojo → Positivo FLU A
- C: Verde/Rojo → Positivo FLU B
- D: Verde/Rojo → Positivo RSV

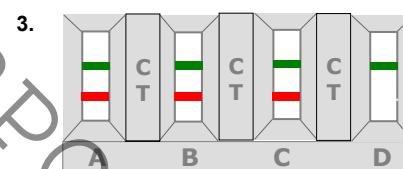


- A: Verde/Rojo → Positivo SARS-CoV-2
- B: Verde/Rojo → Positivo FLU A
- C: Verde/Rojo → Positivo FLU B
- D: Verde → Negativo RSV

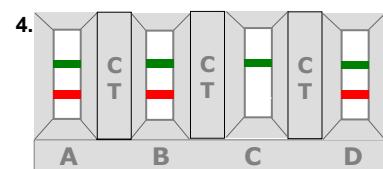


- A: Verde/Rojo → Positivo SARS-CoV-2
- B: Verde/Rojo → Positivo FLU A
- C: Verde → Negativo FLU B
- D: Verde/Rojo → Positivo RSV

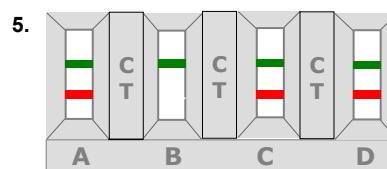


- A: Verde/Rojo → Positivo SARS-CoV-2
- B: Verde → Negativo FLU A
- C: Verde/Rojo → Positivo FLU B
- D: Verde/Rojo → Positivo RSV

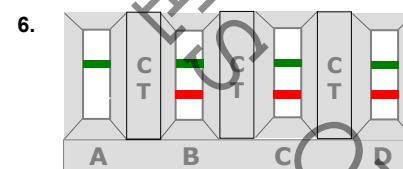


- A: Verde → Negativo SARS-CoV-2
- B: Verde/Rojo → Positivo FLU A
- C: Verde/Rojo → Positivo FLU B
- D: Verde/Rojo → Positivo RSV

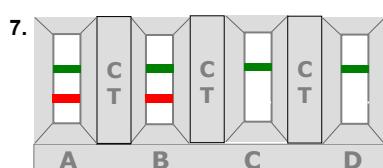

- A: Verde/Rojo → Positivo SARS-CoV-2
- B: Verde/Rojo → Positivo FLU A
- C: Verde → Negativo FLU B
- D: Verde → Negativo RSV

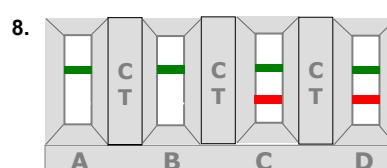

- A: Verde → Negativo SARS-CoV-2
- B: Verde → Negativo FLU A
- C: Verde/Rojo → Positivo FLU B
- D: Verde/Rojo → Positivo RSV

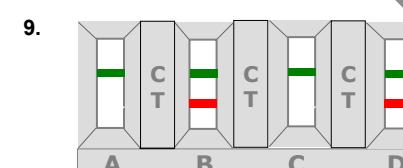


- A: Verde → Negativo SARS-CoV-2
- B: Verde/Rojo → Positivo FLU A
- C: Verde → Negativo FLU B
- D: Verde/Rojo → Positivo RSV




CERTEST SARS-CoV-2 + Flu A + Flu B + RSV


One Step test to detect SARS-CoV-2, Influenza A, Influenza B and RSV antigens in combo card format/
Prueba combo de un solo paso para detección de SARS-CoV-2, Influenza A, Influenza B y RSV antígenos en formato cassette

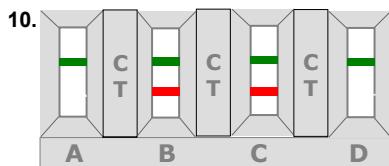


- A: Verde→Negativo SARS-CoV-2
B: Verde/Rojo →Positivo FLU A
C: Verde/Rojo →Positivo FLU B
D: Verde→Negativo RSV

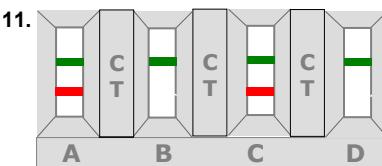


- A: Verde/Rojo →Positivo SARS-CoV-2
B: Verde→Negativo FLU A
C: Verde/Rojo →Positivo FLU B
D: Verde→Negativo RSV

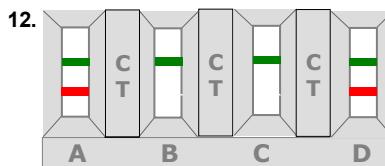


- A: Verde/Rojo →Positivo SARS-CoV-2
B: Verde→Negativo FLU A
C: Verde→Negativo FLU B
D: Verde/Rojo →Positivo RSV

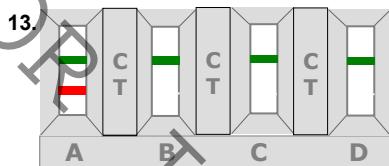


- A: Verde/Rojo →Positivo SARS-CoV-2
B: Verde→Negativo FLU A
C: Verde→Negativo FLU B
D: Verde→Negativo RSV

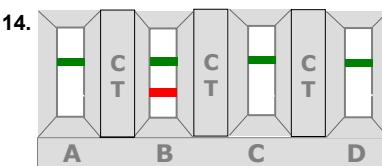

- A: Verde→Negativo SARS-CoV-2
B: Verde/Rojo →Positivo FLU A
C: Verde →Negativo FLU B
D: Verde→Negativo RSV

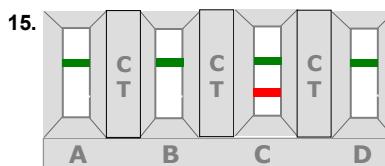

- A: Verde→Negativo SARS-CoV-2
B: Verde→Negativo FLU A
C: Verde/Rojo →Positivo FLU B
D: Verde→Negativo RSV

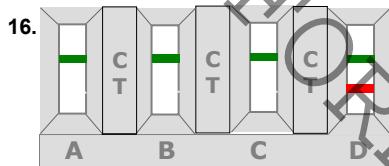

- A: Verde→Negativo SARS-CoV-2
B: Verde→Negativo FLU A
C: Verde→Negativo FLU B
D: Verde/Rojo →Positivo RSV

| | A (SARS-CoV-2) | B (Influenza A) | C (Influenza B) | D (RSV) | Interpretación de los resultados |
|----|---------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|--|
| 1. | - | - | - | - | No hay presencia de antígeno de SARS-CoV-2, Influenza tipo A, Influenza tipo B, RSV en la muestra. |
| | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE | |
| 2. | + | + | + | + | Hay presencia de antígeno de SARS-CoV-2, Influenza tipo A, Influenza tipo B y RSV en la muestra. La presencia de estas líneas (línea verde de control y roja de test), independientemente de su intensidad debería ser considerado como resultado positivo. |
| | VERDE-ROJO | VERDE-ROJO | VERDE-ROJO | VERDE-ROJO | |
| 3. | + | + | + | - | Hay presencia de antígeno de SARS-CoV-2, Influenza tipo A, Influenza tipo B en la muestra. No hay presencia de antígeno de RSV en la muestra. |
| | VERDE-ROJO | VERDE-ROJO | VERDE-ROJO | VERDE | |
| 4. | + | + | - | + | Hay presencia de antígeno de SARS-CoV-2, Influenza tipo A, RSV en la muestra. No hay presencia de antígeno de Influenza tipo B en la muestra. |
| | VERDE-ROJO | VERDE-ROJO | VERDE | VERDE-ROJO | |
| 5. | + | - | + | + | Hay presencia de antígeno de SARS-CoV-2, Influenza tipo B, RSV en la muestra. No hay presencia de antígeno de Influenza tipo A en la muestra. |
| | VERDE-ROJO | VERDE | VERDE-ROJO | VERDE-ROJO | |
| 6. | - | + | + | + | Hay presencia de antígeno de Influenza tipo A, Influenza tipo B, RSV en la muestra. No hay presencia de antígeno de SARS-CoV-2 en la muestra. |
| | VERDE | VERDE-ROJO | VERDE-ROJO | VERDE-ROJO | |
| 7. | + | + | - | - | Hay presencia de antígeno de SARS-CoV-2 e Influenza tipo A en la muestra. No hay presencia de antígeno de Influenza tipo B ni RSV en la muestra. |
| | VERDE-ROJO | VERDE-ROJO | VERDE | VERDE | |
| 8. | - | - | + | + | Hay presencia de antígeno de Influenza tipo B y RSV en la muestra. No hay presencia de antígeno de SARS-CoV-2 ni Influenza tipo A en la muestra. |
| | VERDE | VERDE | VERDE-ROJO | VERDE-ROJO | |
| 9. | - | + | - | + | Hay presencia de antígeno de Influenza tipo A y RSV en la muestra. No |
| | | | | | |



CERTEST SARS-CoV-2 + Flu A + Flu B + RSV

*One Step test to detect SARS-CoV-2, Influenza A, Influenza B and RSV antigens in combo card format/
Prueba combo de un solo paso para detección de SARS-CoV-2, Influenza A, Influenza B y RSV antígenos en formato cassette*

| | VERDE | VERDE-ROJO | VERDE | VERDE-ROJO | hay presencia de antígeno de SARS-CoV-2 ni Influenza tipo B en la muestra. |
|------------|--------------------------|------------|------------|------------|--|
| 10. | - | + | + | - | Hay presencia de antígeno de Influenza tipo A e Influenza tipo B en la muestra. No hay presencia de antígeno de SARS-CoV-2 ni RSV en la muestra. |
| | VERDE | VERDE-ROJO | VERDE-ROJO | VERDE | |
| 11. | + | - | + | - | Hay presencia de antígeno de SARS-CoV-2 e Influenza tipo B en la muestra. No hay presencia de antígeno de Influenza tipo A ni RSV en la muestra. |
| | VERDE-ROJO | VERDE | VERDE-ROJO | VERDE | |
| 12. | + | - | - | + | Hay presencia de antígeno de SARS-CoV-2 y RSV en la muestra. No hay presencia de antígeno de Influenza tipo A ni Influenza tipo B en la muestra. |
| | VERDE-ROJO | VERDE | VERDE | VERDE-ROJO | |
| 13. | + | - | - | - | Hay presencia de antígeno de SARS-CoV-2 en la muestra. No hay presencia de antígeno de Influenza tipo A ni Influenza tipo B ni de RSV en la muestra. |
| | VERDE-ROJO | VERDE | VERDE | VERDE | |
| 14. | - | + | - | - | Hay presencia de antígeno de Influenza tipo A en la muestra. No hay presencia de antígeno de SARS-CoV-2, Influenza tipo B ni de RSV en la muestra. |
| | VERDE | VERDE-ROJO | VERDE | VERDE | |
| 15. | - | - | + | - | Hay presencia de antígeno de Influenza tipo B en la muestra. No hay presencia de antígeno de SARS-CoV-2, Influenza tipo A ni de RSV en la muestra. |
| | VERDE | VERDE | VERDE-ROJO | VERDE | |
| 16. | - | - | | + | Hay presencia de antígeno de RSV en la muestra. No hay presencia de antígeno de SARS-CoV-2, Influenza tipo A ni de Influenza tipo B en la muestra. |
| | VERDE | VERDE | VERDE | VERDE-ROJO | |
| 17. | Cualquier otro resultado | | | | Resultado Inválido: tanto en A, B, C o en D, se recomienda repetir la prueba con la misma muestra y otro test. |

La aparición de cualquiera de los resultados del 2 al 16 de esta tabla, debe ser evaluado con otra prueba confirmatoria.

Cualquiera de los resultados entre el 2 y el 6 no son muy comunes. Las infecciones respiratorias dobles simultáneas son más frecuentes que las triples o cuádruples víricas.

INVÁLIDO: Cuando las líneas de control (VERDE) no aparecen, independientemente de que aparezcan o no las líneas de test (ROJA). Las causas más comunes por las que puede aparecer un resultado inválido son: un volumen insuficiente de muestra, una forma de proceder incorrecta o un deterioro de los reactivos. Si ocurriera esto, debe revisarse el procedimiento y repetir la prueba con un nuevo test. Si los síntomas o la situación persisten, debe dejar de utilizar la prueba y contactar con su distribuidor.

OBSERVACIONES

La intensidad de las líneas de color rojo en las líneas de test (T) en las ventanas de resultados variará dependiendo de la concentración de antígenos presentes en la muestra. Sin embargo, esta prueba es cualitativa, por lo que, ni la cantidad ni la tasa de aumento de antígenos pueden ser determinados por la misma.

CONTROL DE CALIDAD

El test CerTest SARS-CoV-2 + Flu A + Flu B + RSV tiene dos controles:

Control interno: el control interno de funcionamiento viene incluido en la prueba. La línea verde que aparece en la zona de la línea de control (C) en la ventana de resultados es el control interno del proceso, comprobando que el volumen de muestra es suficiente y que el procedimiento seguido ha sido el adecuado.

Control externo: hisopo control positivo.

CONTROL EXTERNO

CerTest SARS-CoV-2 Positive Control es un control de calidad externo para CerTest SARS-CoV-2 + Flu A + Flu B + RSV combo card test.

Este hisopo control se debe usar para evaluar que los reactivos y el funcionamiento del test son adecuados.

CerTest Influenza A Positive Control es un control de calidad externo para CerTest SARS-CoV-2 + Flu A + Flu B + RSV combo card test. Solamente para la tira B (Influenza A).

CerTest Influenza B Positive Control es un control de calidad externo para CerTest SARS-CoV-2 + Flu A + Flu B + RSV combo card test. Solamente para la tira C (Influenza B).



CERTEST SARS-CoV-2 + Flu A + Flu B + RSV

One Step test to detect SARS-CoV-2, Influenza A, Influenza B and RSV antigens in combo card format/
Prueba combo de un solo paso para detección de SARS-CoV-2, Influenza A, Influenza B y RSV antígenos en formato cassette

CerTest RSV Positive Control es un control de calidad externo para CerTest SARS-CoV-2 + Flu A + Flu B + RSV combo card test. Solamente para la tira D (RSV).

Debe ser almacenado entre 2-30°C en su envase original sellado. El hisopo es estable hasta la fecha de caducidad impresa en el envase. No debe abrirse hasta el momento de su uso. No congelar.


PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE CALIDAD EXTERNO

Previamente los tests y los hisopos control positivo se deben acondicionar a la temperatura ambiente (15-30°C). No abrir el envase hasta el momento de la prueba.

1. Sacar CerTest SARS-CoV-2 + Flu A + Flu B + RSV combo card test de su envase sellado antes de utilizar.
2. Abrir el tapón (2). El Reagent Respiratory es el mismo para ambos hisopos y para la dilución de muestras. Usar una pipeta y un tubo de ensayo diferente para cada control.

Procedimiento para el hisopo CerTest SARS-CoV-2 Positive Control

1. Añadir 20 gotas (aprox. 670µL) (1) del Reactivo Respiratory e inmediatamente introducir el hisopo SARS-CoV-2 Positive Control en el tubo de ensayo.
2. Mezclar la solución rotando el hisopo control positivo contra las paredes del tubo de ensayo al menos 15 segundos. Extraer la máxima cantidad del líquido del hisopo rotando y presionándolo contra las paredes del tubo de ensayo mientras se retira del tubo (2). Desechar el hisopo.
3. Usar una pipeta y un test diferente para cada control. Tomar las muestras desde el tubo con la pipeta (3). Cerrar el tubo con el tapón (4) y dispensar 3 gotas (aprox. 100-120µL) a partir de la pipeta en la ventana circular marcada con la letra A (5).
4. Leer el resultado a los 10 minutos. No leer el resultado superados los 10 minutos.
- 5.

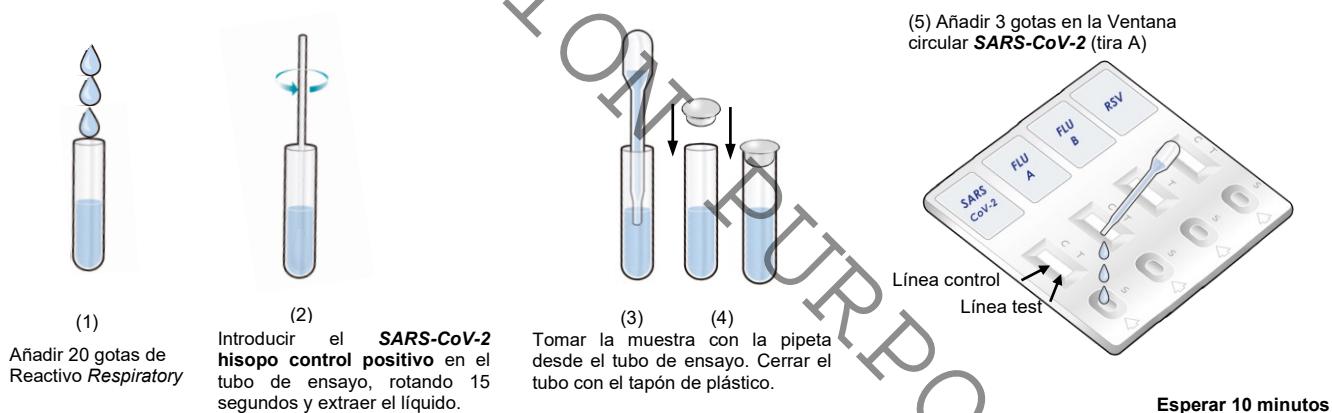


Procedimiento para el hisopo CerTest Influenza A Positive Control

6. Añadir 20 gotas (aprox. 670µL) (6) del Reactivo Respiratory (el mismo reactivo utilizado para el resto de los hisopos de control positivo y para las muestras) en un tubo de ensayo diferente al usado anteriormente e inmediatamente introducir el hisopo Influenza A Positive Control en el tubo de ensayo.
7. Mezclar la solución rotando el hisopo control positivo contra las paredes del tubo de ensayo al menos 15 segundos. Extraer la máxima cantidad del líquido del hisopo rotando y presionándolo contra las paredes del tubo de ensayo mientras se retira del tubo (7). Desechar el hisopo.
8. Usar una pipeta y un test diferente para cada control. Tomar las muestras desde el tubo con la pipeta (8). Cerrar el tubo con el tapón (9) y dispensar 3 gotas (aprox. 100-120µL) a partir de la pipeta en la ventana circular marcada con la letra B (10).
9. Leer el resultado a los 10 minutos. No leer el resultado superados los 10 minutos.


CERTEST SARS-CoV-2 + Flu A + Flu B + RSV

One Step test to detect SARS-CoV-2, Influenza A, Influenza B and RSV antigens in combo card format/
Prueba combo de un solo paso para detección de SARS-CoV-2, Influenza A, Influenza B y RSV antígenos en formato cassette

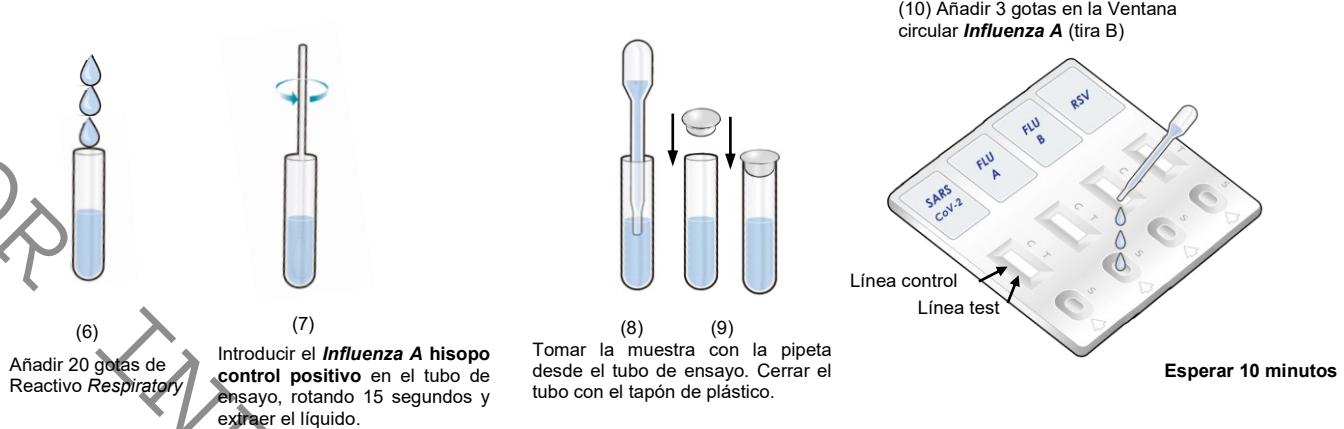

Procedimiento para el hisopo CerTest Influenza B Positive Control

- Añadir 20 gotas (aprox. 670µL) (11) del Reactivo Respiratory (el mismo reactivo utilizado para el resto de los hisopos de control positivo y para las muestras) en un tubo de ensayo diferente al usado anteriormente e inmediatamente introducir el **hisopo Influenza B Positive Control** en el tubo de ensayo.
- Mezclar la solución rotando el hisopo control positivo contra las paredes del tubo de ensayo al menos 15 segundos. Extraer la máxima cantidad del líquido del hisopo rotando y presionándolo contra las paredes del tubo de ensayo mientras se retira del tubo (12). Desechar el hisopo.
- Usar una pipeta y un test diferente para cada control. Tomar las muestras desde el tubo con la pipeta (13). Cerrar el tubo con el tapón (14) y dispensar 3 gotas (aprox. 100-120µL) a partir de la pipeta en la **ventana circular marcada con la letra C** (15).
- Leer el resultado a los 10 minutos. No leer el resultado superados los 10 minutos.

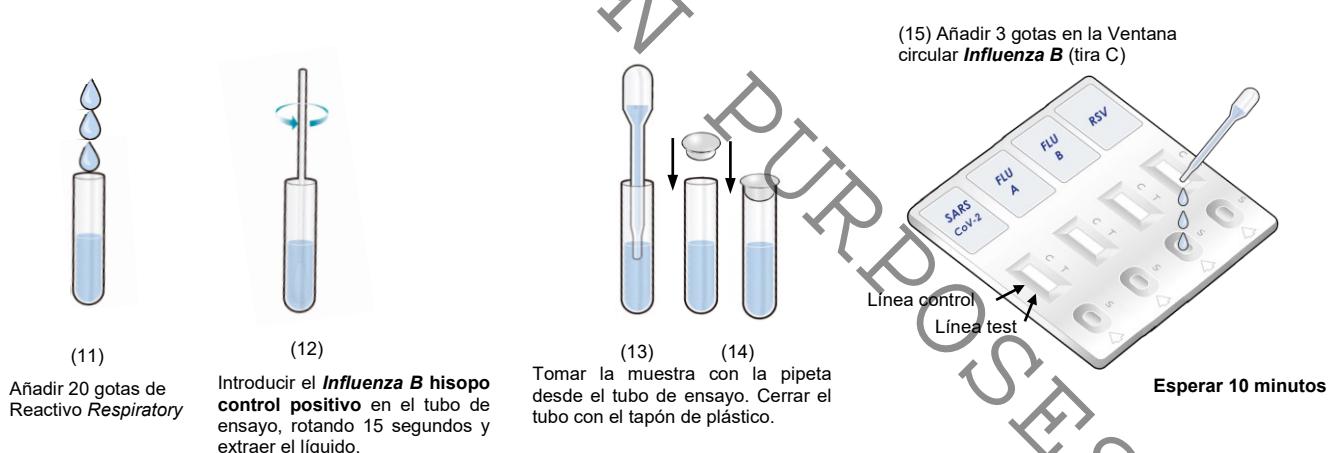


Procedimiento para el hisopo CerTest RSV Positive Control

- Añadir 20 gotas (aprox. 670µL) (16) del Reactivo Respiratory (el mismo reactivo utilizado para el resto de los hisopos de control positivo y para las muestras) en un tubo de ensayo diferente al usado anteriormente e inmediatamente introducir el **hisopo RSV Positive Control** en el tubo de ensayo.
- Mezclar la solución rotando el hisopo control positivo contra las paredes del tubo de ensayo al menos 15 segundos. Extraer la máxima cantidad del líquido del hisopo rotando y presionándolo contra las paredes del tubo de ensayo mientras se retira del tubo (17). Desechar el hisopo.
- Usar una pipeta y un test diferente para cada control. Tomar las muestras desde el tubo con la pipeta (13). Cerrar el tubo con el tapón (18) y dispensar 3 gotas (aprox. 100-120µL) a partir de la pipeta en la **ventana circular marcada con la letra D** (15).
- Leer el resultado a los 10 minutos. No leer el resultado superados los 10 minutos.



CERTEST SARS-CoV-2 + Flu A + Flu B + RSV

One Step test to detect SARS-CoV-2, Influenza A, Influenza B and RSV antigens in combo card format/
Prueba combo de un solo paso para detección de SARS-CoV-2, Influenza A, Influenza B y RSV antígenos en formato cassette

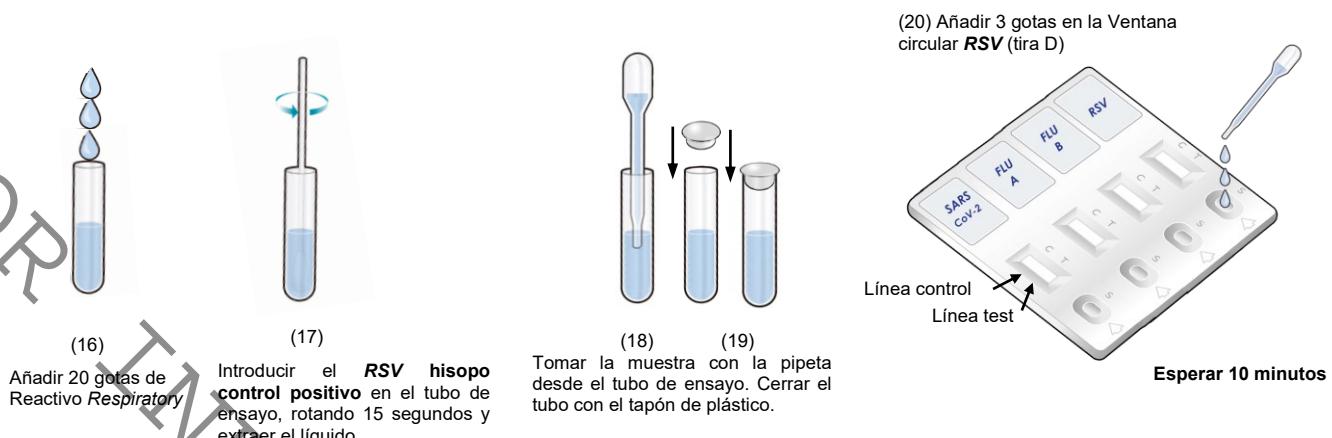

Los controles positivos deberían usarse cada vez que se utilice un nuevo kit o según indiquen los controles establecidos por su laboratorio para los procedimientos de control de calidad.

INTERPRETACIÓN PROCEDIMIENTO CONTROL POSITIVO

| SARS-CoV-2 Positive Control | Influenza A Positive Control | Influenza B Positive Control | RSV Positive Control | | Interpretación de los resultados |
|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|--|---|
| 1. POSITIVO | | | | | |
| VERDE-ROJO | VERDE-ROJO | VERDE-ROJO | VERDE-ROJO | | SARS-CoV-2 (A) POSITIVO , Influenza A (B) POSITIVO , Influenza B (C) POSITIVO y RSV (D) POSITIVO : Una línea VERDE aparece (línea de control (C)) y una línea ROJA aparece (línea de test (T)) en cada una de las tiras, en la ventana de resultados, debido a la presencia de antígenos en el hisopo control positivo SARS-CoV-2 en la tira A, el hisopo control positivo Influenza A en la tira B, el hisopo control positivo Influenza B en la tira C y el hisopo control positivo RSV en la tira D. |
| 2. INVÁLIDO | | | | | Resultado Inválido, se recomienda repetir la prueba con otro test y controles positivos. |
| Cualquier otro resultado | | | | | |

RECOMENDACIONES

Recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) con respecto al uso de detección de antígenos para SARS-CoV-2: Antigen-detection in the diagnosis of SARS-CoV-2 infection using rapid immunoassays- 11 September 2020.

- Para optimizar el rendimiento de la prueba, éstas se deben realizar por personal entrenado y deben ser realizadas siguiendo estrictamente el procedimiento del test y dentro de los 5-7 días posteriores al inicio de los síntomas.
- Siempre que sea posible, las muestras positivas que den resultados positivos deben enviarse a laboratorios con capacidad para realizar test de amplificación de ácido nucleico para su confirmación.



CERTEST SARS-CoV-2 + Flu A + Flu B + RSV

*One Step test to detect SARS-CoV-2, Influenza A, Influenza B and RSV antigens in combo card format/
Prueba combo de un solo paso para detección de SARS-CoV-2, Influenza A, Influenza B y RSV antígenos en formato cassette*

3. Esta prueba podría usarse para detección de individuos en riesgo y aislar rápidamente casos positivos en brotes de COVID-19 confirmados por técnicas de amplificación de ácido nucleico.
4. Para monitorear la tendencia en incidencia de enfermedad en comunidades.
5. Para la detección temprana y aislamiento de casos positivos en los centros de salud, donde existe una transmisión comunitaria generalizada.
6. Un resultado negativo no puede excluir por completo una infección activa por COVID-19, siempre que sea posible, se debe repetir el test o preferiblemente realizar la prueba de amplificación de ácido nucleico, especialmente en pacientes asintomáticos.
7. Aunque la prueba CerTest SARS-CoV-2 + Flu A + Flu B + RSV no fue validada usando muestras de personas asintomáticas, se ha demostrado que los casos asintomáticos tienen cargas virales similares a los casos sintomáticos, por lo que CerTest SARS-CoV-2 + Flu A + Flu B + RSV podría detectarlos como positivos.

LIMITACIONES

- 1.Una vez abierto, el test no debe usarse después de 2 horas.
1. CerTest SARS-CoV-2 + Flu A + Flu B + RSV debería utilizarse sólo con muestras de hisopos nasofaríngeos. El uso de muestras tomadas de otros sitios o el uso de otras muestras como saliva, esputos u orina no ha sido determinado. La calidad del test depende de la calidad de la muestra; por lo que se debe realizar una adecuada toma de muestras nasofaríngeas.
- 2.La intensidad de la línea del test puede variar desde muy fuerte a alta concentración de antígenos a débil cuando la concentración de antígenos está cerca del valor del límite de detección del test.
- 3.Los resultados positivos determinan la presencia de antígenos de SARS-CoV-2 y/o *Influenza* tipo A y/o tipo B y/o *RSV*. Un diagnóstico de infección por SARS-CoV-2, *Influenza* tipo A, *Influenza* tipo B, *RSV* debería evaluarse por un especialista considerando todos los hallazgos clínicos y de laboratorio basándose en la correlación entre estos resultados y las observaciones clínicas.
- 4.Los resultados positivos del test no descartan co-infecciones con otro patógenos.
- 5.Solamente los medios de transporte: VTM, UTM y buffer salino han sido validados con CerTest SARS-CoV-2 + Flu A + Flu B + RSV test, la utilización de los medios de transporte puede reducir la sensibilidad del test por la dilución excesiva de muestra.
- 6.Un resultado negativo no se puede considerar como concluyente, puede darse que la concentración de antígenos en muestras nasofaríngeas sea inferior al valor del límite de detección. Si los síntomas o la situación persisten, se recomienda que los resultados negativos se confirmen mediante otro método y/o identificación del virus por cultivo celular, PCR u otra técnica.

VALORES ESPERADOS

El 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró al COVID-19 una emergencia de salud pública de importancia internacional. Desde el inicio de la pandemia, el SARS-CoV-2 ha afectado a millones de personas y ha causado miles de víctimas en todo el mundo.

Estudios recientes han demostrado que la infección viral primaria encontrada en pacientes sintomáticos fue idéntica a la observada en pacientes asintomáticos, lo que sugiere que los pacientes con COVID-19 con infecciones asintomáticas son capaces de transmitir SARS-CoV-2. Durante el período de incubación, los pacientes asintomáticos también pueden transmitir el virus a personas sanas.

Aunque la infección por SARS-CoV-2 puede afectar a personas de cualquier edad, los niños y los ancianos con asma se encuentran en una categoría de mayor riesgo de contraer la enfermedad. Aquellos con problemas de salud subyacentes como cáncer, enfermedades respiratorias crónicas, enfermedades cardiovasculares y diabetes también tienen una mayor probabilidad de desarrollar enfermedades graves.

Las epidemias de gripe se repiten anualmente y pueden afectar a personas de todas las edades, aunque existe un alto riesgo de aparición de complicaciones en niños menores de dos años y adultos a partir de 65 años. Este riesgo existe también en personas de cualquier edad que presenten ciertos problemas de salud, tales como enfermedades crónicas de corazón, pulmón, riñón, hígado, sangre o enfermedades metabólicas (por ejemplo, diabetes) o en personas inmunocomprometidas.

La gripe afecta anualmente entre un 20 y un 30% de la población de EE.UU. Tres cuartas partes de los individuos desarrollan una enfermedad respiratoria aguda y una tercera parte requiere atención médica. Cualquier año, entre 20000 y 40000 americanos muere y más de 100000 son hospitalizados a causa de complicaciones relacionadas con esta enfermedad.

El *Virus Respiratorio Sincitial (RSV)* es la principal causa de visitas a urgencias y hospitalización por infecciones agudas del tracto respiratorio inferior (LRTI) en bebés y niños pequeños en todo el mundo.

En adultos, ancianos y niños sanos, los síntomas del *Virus Respiratorio Sincitial* son leves y por lo general imitan al resfriado común. Las medidas de cuidado personal son, por lo general, todo lo que se necesita para aliviar cualquier malestar.





CERTEST SARS-CoV-2 + Flu A + Flu B + RSV

One Step test to detect SARS-CoV-2, Influenza A, Influenza B and RSV antigens in combo card format/
Prueba combo de un solo paso para detección de SARS-CoV-2, Influenza A, Influenza B y RSV antígenos en formato cassette

La infección por el Virus Respiratorio Sincitial puede ser grave en algunos casos, especialmente en bebés prematuros y recién nacidos con problemas de salud subyacentes. RSV puede convertirse también en un problema serio en ancianos, adultos con enfermedades de corazón y pulmón, o cualquier persona con el sistema inmunitario muy débil (inmunocomprometido).

CARACTERÍSTICAS DEL TEST

Sensibilidad analítica (límite de detección)

El límite de detección (típico) de CerTest SARS-CoV-2 + Flu A + Flu B + RSV (tira A: SARS-CoV-2) es 1.00 ng/mL de proteína recombinante de SARS-CoV-2 o 1×10^3 TCID₅₀/mL con 2019nCoV/USA-WA1/2020.

El límite de detección (típico) de CerTest SARS-CoV-2 + Flu A + Flu B + RSV (tira B: Influenza A) es 6.25 ng/mL de nucleoproteína recombinante de *Influenza A*.

El límite de detección (típico) de CerTest SARS-CoV-2 + Flu A + Flu B + RSV (tira B: Influenza B) es 25.00 ng/mL de nucleoproteína recombinante de *Influenza B*.

El límite de detección (típico) de CerTest SARS-CoV-2 + Flu A + Flu B + RSV (tira C: RSV) es 10.00 ng/mL de proteína recombinante de *RSV*.

Sensibilidad y especificidad clínica

Evaluaciones de SARS-CoV-2 + Flu A + Flu B + RSV (tira A: SARS-CoV-2)

Una evaluación externa (Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Madrid (España)), con muestras nasofaríngeas procedentes de personas sospechosas de infección por el virus SARS-CoV-2, se llevó a cabo comparando los resultados obtenidos por un test inmunocromatográfico (CerTest SARS-CoV-2 + Flu A + Flu B + RSV, Certest (tira A: SARS-CoV-2)) frente a técnica qPCR (VIASURE). Los resultados se muestran a continuación

| IC test: CerTest SARS-CoV-2 + Flu A + Flu B + RSV (SARS-CoV-2) | Técnica PCR | | | Total |
|---|-------------|-----|--|-------|
| | + | - | | |
| + | 79 | 0 | | 79 |
| - | 5 | 150 | | 155 |
| Total | 84 | 150 | | 234 |

| CerTest SARS-CoV-2 + Flu A + Flu B + RSV (SARS-CoV-2) vs técnica qPCR | | |
|---|-------------|----------------------------|
| | Valor Medio | 95% intervalo de confianza |
| Sensibilidad(*) | 94.0% | 86.7–98.0% |
| Especificidad | 100.0% | 97.6–100.0% |
| VPP | 100.0% | 95.4–100.0% |
| VPN | 96.8% | 92.6–98.9% |

(*) Teniendo en cuenta las recomendaciones de la OMS *Antigen-detection in the diagnosis of SARS-CoV-2 infection using rapid immunoassays* (11 September 2020), la sensibilidad del test fue calculada con muestras nasofaríngeas con alta carga viral (la carga viral alta se espera en las primeras fases en las que aparecen síntomas de la enfermedad (en los 5-7 primeros días de enfermedad) en el rango de detección de los Ag -RTD).

Una evaluación externa (Laboratoire de Virologie CHU Amiens-Picardie, Amiens (Francia)), con muestras nasofaríngeas procedentes de personas sospechosas de infección por el virus SARS-CoV-2, se llevó a cabo comparando los resultados obtenidos por un test inmunocromatográfico (CerTest SARS-CoV-2 + Flu A + Flu B + RSV, Certest (tira A: SARS-CoV-2)) frente a técnica qPCR. Los resultados se muestran a continuación:

| IC test: CerTest SARS-CoV-2 + Flu A + Flu B + RSV | Técnica qPCR | | | Total |
|---|--------------|---|--|-------|
| | + | - | | |
| + | 88 | 0 | | 88 |





CERTEST SARS-CoV-2 + Flu A + Flu B + RSV

*One Step test to detect SARS-CoV-2, Influenza A, Influenza B and RSV antigens in combo card format/
Prueba combo de un solo paso para detección de SARS-CoV-2, Influenza A, Influenza B y RSV antígenos en formato cassette*

| | | | | |
|--------------|---|----|----|-----|
| (SARS-CoV-2) | - | 8 | 62 | 70 |
| Total | | 96 | 62 | 158 |

CerTest SARS-CoV-2 + Flu A + Flu B + RSV (SARS-CoV-2) vs técnica qPCR

| | Valor Medio | 95% intervalo de confianza |
|------------------|-------------|----------------------------|
| Sensibilidad (*) | 91.7% | 84.2–96.3% |
| Especificidad | 100.0% | 94.2–100.0% |
| VPP | 100.0% | 95.9–100.0% |
| VPN | 88.6% | 78.7–94.9% |

(*) Teniendo en cuenta las recomendaciones de la OMS *Antigen-detection in the diagnosis of SARS-CoV-2 infection using rapid immunoassays* (11 September 2020), la sensibilidad del test fue calculada con muestras nasofaríngeas con alta carga viral (la carga viral alta se espera en las primeras fases en las que aparecen síntomas de la enfermedad (en los 5-7 primeros días de enfermedad) en el rango de detección de los Ag -RTD).

Una evaluación, con muestras nasofaríngeas de personas sospechosas de infección por el virus SARS-CoV-2, se llevó a cabo comparando los resultados obtenidos por un test immunocromatográfico (CerTest SARS-CoV-2 + Flu A + Flu B + RSV, Certest (tira A: SARS-CoV-2)) frente a técnica qPCR (VIASURE). Los resultados se muestran a continuación:

| IC test: CerTest SARS-CoV-2 + Flu A + Flu B + RSV (SARS-CoV-2) | | Técnica pPCR | | | Total | |
|---|-------|--------------|-----|-----|-------|--|
| | | + | - | 26 | | |
| | | | | 1 | | |
| | | - | | 233 | 235 | |
| | Total | 28 | 234 | | 262 | |

CerTest SARS-CoV-2 + Flu A + Flu B + RSV (SARS-CoV-2) vs técnica qPCR

| | Valor Medio | 95% intervalo de confianza |
|------------------|-------------|----------------------------|
| Sensibilidad (*) | 92.9% | 76.5–99.1% |
| Especificidad | 99.6% | 97.6–100.0% |
| VPP | 96.3% | 81.0–99.9% |
| VPN | 99.1% | 97.0–99.9% |

(*) Teniendo en cuenta las recomendaciones de la OMS *Antigen-detection in the diagnosis of SARS-CoV-2 infection using rapid immunoassays* (11 September 2020), la sensibilidad del test fue calculada con muestras nasofaríngeas con alta carga viral (la carga viral alta se espera en las primeras fases en las que aparecen síntomas de la enfermedad (en los 5-7 primeros días de enfermedad) en el rango de detección de los Ag -RTD).

Evaluaciones de SARS-CoV-2 + Flu A + Flu B + RSV (tira B: Influenza A)

Los resultados mostrados en las siguientes tablas han sido obtenidos de diferentes evaluaciones desarrolladas usando un test immunocromatográfico (CerTest SARS-CoV-2 + Flu A + Flu B + RSV (Influenza A), CerTest) y otros kits comerciales.

1574 muestras respiratorias han sido usadas para la evaluación de Influenza A (130 muestras positivas, 11 falsos positivos, 1402 muestras negativas, 31 falsos negativos). Los resultados se muestran a continuación:

| | Número de evaluación | Verdaderos positivos | Falsos negativos | Verdaderos negativos | Falsos positivos |
|---|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|
| CerTest SARS-CoV-2 + Flu A + Flu B + RSV (Influenza A) vs XPECT FLU A&B (Remel) | I | 7 | 0 | 85 | 1 |
| CerTest SARS-CoV-2 + Flu A + Flu B + RSV (Influenza A) | II | 101 | 26 | 955 | 3 |





CERTEST SARS-CoV-2 + Flu A + Flu B + RSV

*One Step test to detect SARS-CoV-2, Influenza A, Influenza B and RSV antigens in combo card format/
Prueba combo de un solo paso para detección de SARS-CoV-2, Influenza A, Influenza B y RSV antígenos en formato cassette*

| | | | | | | |
|--|-----|-----|----|------|----|--|
| A) vs Instant EQAS program (March 2016) | | | | | | |
| CerTest SARS-CoV-2 + Flu A + Flu B + RSV (Influenza A) vs Binax NOW® Influenza A&B Card (Alere) | III | 11 | 2 | 87 | 0 | |
| CerTest SARS-CoV-2 + Flu A + Flu B + RSV (Influenza A) vs SD Bioline, Influenza Ag A/B/A (H1N1) (SD Bioline) | IV | 1 | 0 | 97 | 0 | |
| CerTest SARS-CoV-2 + Flu A + Flu B + RSV (Influenza A) vs MariPOC® respi (AroDia International) | V | 10 | 3 | 178 | 7 | |
| Total | | 130 | 31 | 1402 | 11 | |

CerTest SARS-CoV-2 + Flu A + Flu B + RSV (Influenza A) vs otros test utilizados en la evaluación

(I, II, III, IV, V) para Influenza A

| | Valor Medio | 95% intervalo de confianza |
|---------------|-------------|----------------------------|
| Sensibilidad | 80.7% | 73.8 – 86.5% |
| Especificidad | 99.2% | 98.6 – 99.6% |
| VPP | 92.2% | 86.5 – 96.0% |
| VPN | 97.8% | 96.9 – 98.5% |

Evaluaciones de SARS-CoV-2 + Flu A + Flu B + RSV (tira C: Influenza B)

Los resultados mostrados en las siguientes tablas han sido obtenidos de diferentes evaluaciones desarrolladas usando un test inmunocromatográfico (CerTest SARS-CoV-2 + Flu A + Flu B + RSV (Influenza B), CerTest) y otros kits comerciales.

1276 muestras respiratorias han sido usadas para la evaluación de Influenza B (75 muestras positivas, 6 falsos positivos, 1181 muestras negativas 14 falsos negativos). Los resultados se muestran a continuación:

| | Número de evaluación | Verdaderos positivos | Falsos negativos | Verdaderos negativos | Falsos positivos |
|--|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|
| CerTest SARS-CoV-2 + Flu A + Flu B + RSV (Influenza B) vs XPECT FLU A&B (Remel) | I | 7 | 2 | 83 | 1 |
| CerTest SARS-CoV-2 + Flu A + Flu B + RSV (Influenza B) vs Instant EQAS program (March 2016) | II | 63 | 12 | 1005 | 5 |
| CerTest SARS-CoV-2 + Flu A + Flu B + RSV (Influenza B) vs SD Bioline, Influenza Ag A/B/A (H1N1) (SD Bioline) | III | 5 | 0 | 93 | 0 |
| Total | | 75 | 14 | 1181 | 6 |

CerTest SARS-CoV-2 + Flu A + Flu B + RSV (Influenza B) vs otros test utilizados en la evaluación

(I, II, III) para Influenza B

| | Valor Medio | 95% intervalo de confianza |
|---------------|-------------|----------------------------|
| Sensibilidad | 84.3% | 75.0 – 91.1% |
| Especificidad | 99.5% | 98.9 – 99.8% |
| VPP | 92.6% | 84.6 – 97.2% |
| VPN | 98.8% | 98.0 – 99.4% |





CERTEST SARS-CoV-2 + Flu A + Flu B + RSV

One Step test to detect SARS-CoV-2, Influenza A, Influenza B and RSV antigens in combo card format/
Prueba combo de un solo paso para detección de SARS-CoV-2, Influenza A, Influenza B y RSV antígenos en formato cassette

EVALUACIÓN DE CERTEST SARS-CoV-2 + FLU A + FLU B + RSV (TIRA D: RSV)

Se llevó a cabo una evaluación, comparando los resultados obtenidos con un test inmunocromatográfico (CerTest SARS-CoV-2 + Flu A + Flu B + RSV, CerTest (tira D: RSV) y otro test inmunocromatográfico comercializado (BinaxNOW® RSV (Alere). Los resultados se muestran a continuación:

| IC test: CerTest SARS-CoV-2+ Flu A + Flu B + RSV (RSV) | IC test: BinaxNOW® RSV | | | | Total |
|---|---------------------------|----|---|----|-------|
| | | + | - | | |
| + | 18 | 0 | | 18 | |
| - | 1 | 10 | | 11 | |
| Total | 19 | 10 | | 29 | |

| CerTest SARS-CoV-2 + Flu A + Flu B + RSV (RSV) vs BinaxNOW® RSV | | |
|---|-------------|----------------------------|
| | Valor Medio | 95% intervalo de confianza |
| Sensibilidad | 94.7% | 74.0–99.9% |
| Especificidad | 100.0% | 69.2–100.0% |
| VPP | 100.0% | 81.5–100.0% |
| VPN | 90.9% | 58.7–99.8% |

Los resultados mostraron que CerTest SARS-CoV-2 + Flu A + Flu B + RSV presenta una alta sensibilidad y especificidad para detectar SARS-CoV-2, Influenza tipo A, Influenza tipo B y RSV.

Efecto Hook

CerTest SARS-CoV-2 + Flu A + Flu B + RSV test no mostró efecto Hook inhibitorio a concentraciones mayores de 100,000xLoD para la tira A: SARS-CoV-2 ni a concentraciones mayores de 30,000xLoD para la tira B: Influenza A ni a concentraciones mayores de 8,000xLoD para la tira C: Influenza B ni a concentraciones mayores de 39,000xLoD para la tira D: RSV.

Reacciones cruzadas

Se llevó a cabo una evaluación para determinar posibles reacciones cruzadas de test CerTest SARS-CoV-2 + Flu A + Flu B + RSV; no se detectó reacción cruzada con organismos, patógenos, sustancias que podrían causar infecciones:

Para tira A. SARS-CoV-2

| | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------|
| Adenovirus | Cryptosporidium | Lactoferrina humana | Shigella boydii |
| Astrovirus | Entamoeba histolytica | Legionella pneumophila | Shigella dysenteriae |
| Calprotectina humana | Escherichia coli O157 | Listeria monocytogenes | Shigella flexneri |
| Campylobacter jejuni | Giardia | Norovirus GI | Shigella sonnei |
| Clostridium difficile antigen GDH | Helicobacter pylori | Norovirus GII | Streptococcus pneumoniae |
| Clostridium difficile Toxin A | Hemoglobina bovina | Rotavirus | Streptococcus pyogenes |
| Clostridium difficile Toxin B | Hemoglobina de cerdo | Salmonella enteritidis | Transferrina humana |
| Coronavirus strain 229E | Hemoglobina humana | Salmonella paratyphi A | Virus Respiratorio Sincitial |
| Coronavirus strain NL63 | Influenza tipo A | Salmonella typhi | Yersinia Enterocolitica O:3 |
| Coronavirus strain OC43 | Influenza tipo B | Salmonella typhimurium | Yersinia Enterocolitica O:9 |

Cinco muestras positivas para Coronavirus humano HKU1 fueron probadas en una evaluación externa realizada con el test CerTest SARS-CoV-2 + Flu A + Flu B + RSV (SARS-CoV-2, tira A) y los resultados obtenidos fueron negativos. Esto sugiere que no hay reacción cruzada con HKU1. Además, el porcentaje de similitud de la secuencia de la proteína de la nucleocápside de HKU1 con la secuencia de la proteína de la nucleocápside del SARS-CoV-2 es de aproximadamente el 35%, lo que se considera una homología muy baja. Esto sugiere que no hay reacción cruzada con HKU1.

Tres muestras positivas para Rinovirus fueron probadas en una evaluación externa realizada con el test CerTest SARS-CoV-2 + Flu A + Flu B + RSV (SARS-CoV-2, tira A) y los resultados obtenidos fueron negativos. Esto sugiere que no hay reacción cruzada con Rinovirus.





CERTEST SARS-CoV-2 + Flu A + Flu B + RSV

One Step test to detect SARS-CoV-2, Influenza A, Influenza B and RSV antigens in combo card format/
Prueba combo de un solo paso para detección de SARS-CoV-2, Influenza A, Influenza B y RSV antígenos en formato cassette

CerTest SARS-CoV-2 + Flu A + Flu B + RSV (SARS-CoV-2, tira A) muestra algo de reacción cruzada con SARS y muy baja con MERS de reacción cruzada con SARS y muy baja con MERS.

Para tira B. Influenza A

| | | | |
|--|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Adenovirus | Coronavirus strain OC43 | Legionella pneumophila | <i>Shigella boydii</i> |
| Astrovirus | <i>Entamoeba histolytica</i> | <i>Listeria monocytogenes</i> | <i>Shigella dysenteriae</i> |
| <i>Calprotectina humana</i> | <i>Escherichia coli O157</i> | MERS | <i>Shigella flexneri</i> |
| <i>Campylobacter jejuni</i> | Giardia | Norovirus GI | <i>Shigella sonnei</i> |
| <i>Clostridium difficile antigen GDH</i> | <i>Helicobacter pylori</i> | Norovirus GII | <i>Streptococcus pneumoniae</i> |
| <i>Clostridium difficile Toxin A</i> | Hemoglobina bovina | Rotavirus | <i>Streptococcus pyogenes</i> |
| <i>Clostridium difficile Toxin B</i> | Hemoglobina de cerdo | Salmonella enteritidis | <i>Transferrina humana</i> |
| SARS-CoV-1 (SARS) | Hemoglobina humana | Salmonella paratyphi A | Virus Respiratorio Sincitial |
| SARS-CoV-2 (SARS-CoV-2) | Influenza tipo B | Salmonella typhi | <i>Yersinia Enterocolitica O:3</i> |
| Coronavirus strain 229E | Lactoferrina humana | Salmonella typhimurium | <i>Yersinia Enterocolitica O:9</i> |
| Coronavirus strain NL63 | | | |

Para tira C. Influenza B

| | | | |
|--|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Adenovirus | Coronavirus strain OC43 | Legionella pneumophila | <i>Salmonella typhi</i> |
| Astrovirus | <i>Entamoeba histolytica</i> | <i>Listeria monocytogenes</i> | <i>Salmonella typhimurium</i> |
| Bovine Haemoglobin | <i>Escherichia coli O157</i> | MERS | <i>Shigella boydii</i> |
| <i>Campylobacter jejuni</i> | Giardia | Norovirus GI | <i>Shigella dysenteriae</i> |
| <i>Clostridium difficile antigen GDH</i> | <i>Helicobacter pylori</i> | Norovirus GII | <i>Shigella flexneri</i> |
| <i>Clostridium difficile Toxin A</i> | Human Calprotectin | Pig Haemoglobin | <i>Shigella sonnei</i> |
| <i>Clostridium difficile Toxin B</i> | Human Haemoglobin | Rotavirus | <i>Streptococcus pneumoniae</i> |
| Coronavirus SARS-1 (SARS) | Human Lactoferrin | Respiratory Syncytial Virus | <i>Streptococcus pyogenes</i> |
| Coronavirus SARS-2 (SARS-CoV-2) | Human Transferrin | Salmonella enteritidis | <i>Yersinia Enterocolitica O:3</i> |
| Coronavirus strain 229E | Influenza tipo A | Salmonella paratyphi A | <i>Yersinia Enterocolitica O:9</i> |
| Coronavirus strain NL63 | | | |

Para tira D. RSV

| | | | |
|--|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Adenovirus | Coronavirus strain OC43 | Influenza tipo B | <i>Salmonella typhi</i> |
| Astrovirus | <i>Entamoeba histolytica</i> | Legionella pneumophila | <i>Salmonella typhimurium</i> |
| Bovine Haemoglobin | <i>Escherichia coli O157</i> | <i>Listeria monocytogenes</i> | <i>Shigella boydii</i> |
| <i>Campylobacter jejuni</i> | Giardia | MERS | <i>Shigella dysenteriae</i> |
| <i>Clostridium difficile antigen GDH</i> | <i>Helicobacter pylori</i> | Norovirus GI | <i>Shigella flexneri</i> |
| <i>Clostridium difficile Toxin A</i> | Human Calprotectin | Norovirus GII | <i>Shigella sonnei</i> |
| <i>Clostridium difficile Toxin B</i> | Human Haemoglobin | Pig Haemoglobin | <i>Streptococcus pneumoniae</i> |
| Coronavirus SARS-1 (SARS) | Human Lactoferrin | Rotavirus | <i>Streptococcus pyogenes</i> |
| Coronavirus SARS-2 (SARS-CoV-2) | Human Transferrin | Salmonella enteritidis | <i>Yersinia Enterocolitica O:3</i> |
| Coronavirus strain 229E | Influenza tipo A | Salmonella paratyphi A | <i>Yersinia Enterocolitica O:9</i> |
| Coronavirus strain NL63 | | | |





CERTEST SARS-CoV-2 + Flu A + Flu B + RSV

*One Step test to detect SARS-CoV-2, Influenza A, Influenza B and RSV antigens in combo card format/
Prueba combo de un solo paso para detección de SARS-CoV-2, Influenza A, Influenza B y RSV antígenos en formato cassette*

Interferencias

Se llevó a cabo una evaluación para determinar posibles interferencias de CerTest SARS-CoV-2 + Flu A + Flu B + RSV; no se detectó interferencia con ninguna de las sustancias probadas:

| Potencial sustancia interferente | Concentración | Resultados | Potencial sustancia interferente | Concentración | Resultados |
|---|----------------------------|------------|--|----------------------------|------------|
| Metronidazole | 3.0 mg/mL | Negativo | Loperamide hydrochloride (<i>Fortasec</i>) | 0.15 mg/mL | Negativo |
| Ampicillín | 3.0 mg/mL | Negativo | Heparin (<i>Hibor</i>) | 350.0 IU/mL | Negativo |
| Oseltamivir | 3.0·10 ⁻² mg/mL | Negativo | Almagato (<i>Almax</i>) | 3.0 mg/mL | Negativo |
| Amantadine | 0.3 mg/mL | Negativo | Fosfamycin (<i>Monurol</i>) | 3.0·10 ⁻³ mg/mL | Negativo |
| Ribavirin | 3.0 mg/mL | Negativo | Acetylcysteine (<i>Fluimucil</i>) | 3.0·10 ⁻² mg/mL | Negativo |
| Codeíne (<i>Toseína</i>) | 0.2 mg/mL | Negativo | Dexketoprofen trometamol (<i>Enantyum</i>) | 0.3 mg/mL | Negativo |
| Benzocaina (<i>Angileptol</i>) | 3.0·10 ⁻² mg/mL | Negativo | Levofloxacin | 3.0·10 ⁻² mg/mL | Negativo |
| Cloperastina (<i>Flutox</i>) | 0.3 mg/mL | Negativo | Ciprofloxacín | 0.3 mg/mL | Negativo |
| Carbocisteína (<i>Iniston mucolítico</i>) | 3.0·10 ⁻² mg/mL | Negativo | Rifampicina (<i>Rifaldin</i>) | 0.3 mg/mL | Negativo |
| Loratadine | 0.3 mg/mL | Negativo | Phenoxymethylpenicilin potassium | 3.0 mg/mL | Negativo |
| Dexchloropheniramina (<i>Polaramine</i>) | 0.3 mg/mL | Negativo | Ambroxol hydrochloride (<i>Mucosan</i>) | 0.3 mg/mL | Negativo |
| Ebastina (<i>Ebastel</i>) | 3.0 mg/mL | Negativo | Macrogol 3350 (<i>Movicol</i>) | 3.0 mg/mL | Negativo |
| Acetyl Salicylico (<i>Adiro</i>) | 0.3 mg/mL | Negativo | Lysine Carbocysteinato (<i>Pectox</i>) | 3.0·10 ⁻² mg/mL | Negativo |
| Ibuprofén (<i>Epidifen</i>) | 0.3 mg/mL | Negativo | Hydroxyzine dihidrocloride | 0.3 mg/mL | Negativo |
| Paracetamol (<i>Dolocatil</i>) | 5.0 mg/mL | Negativo | Lorazepam | 3.0·10 ⁻³ mg/mL | Negativo |
| Metamizole (<i>Nolotil</i>) | 5.0 mg/mL | Negativo | Amoxicilin | 3.0 mg/mL | Negativo |
| Prednisone | 0.3 mg/mL | Negativo | Mercaptopurine | 0.3 mg/mL | Negativo |
| Omeprazole | 2.0·10 ⁻³ mg/mL | Negativo | Biotina | 100.0 µg/mL | Negativo |
| Hemoglobina humana | 5.0 µg/mL | Negativo | Lactoferrina humana | 5.0 µg/mL | Negativo |
| Transferrina humana | 0.5 µg/mL | Negativo | Mucina | 5.0 mg/mL | Negativo |
| Calprotectina humana | 5.0 µg/mL | Negativo | Sangre humana | 50.0 mg/mL | Negativo |





CERTEST SARS-CoV-2 + Flu A + Flu B + RSV

One Step test to detect SARS-CoV-2, Influenza A, Influenza B and RSV antigens in combo card format/
Prueba combo de un solo paso para detección de SARS-CoV-2, Influenza A, Influenza B y RSV antígenos en formato cassette


REFERENCES/BIBLIOGRAFÍA

1. Palestino, G.; García-Silva, I.; González-Ortega, O. and Rosales-Mendoza, S. **Can nanotechnology help in the fight against COVID-19?** *Expert Review of Anti-infective Therapy.* <https://doi.org/10.1080/14787210.2020.1776115>. Jun. 2020.
2. Moeis MR.; Rahayu AP.; Ihsani N. and Pertiwi W. **Coronavirus-SARS-CoV-2: Biology and Problems in rRT-PCR Detection.** *Borneo Journal of Pharmacy.* Vol. 3; special Issue 1:136-145. Jun. 2020. <https://doi.org/10.33084/bjop.v3iSpecial-1.1429>
3. Arnedo-Pena, A.; Sabater-Vidal, S.; Meseguer-Ferrer, N.; Pac-Sa, M. R.; Mañes-Flor, P.; Gascó-Laborda, J. C.; Larrea, R. M.; Tirado-Balaguer, M. D.; Romeu-García, M. A.; Gil-Fortuño, M.; Safont-Adsuara, L.; Blasco, A.; Gomila-Sar, B.; Moreno-Muñoz, M. R. and Bellido-Blasco, J. **COVID-19 secondary attack rate and risk factors in household contacts in Castellón (Spain): Preliminary report.** *Revista Enfermedades Emergentes.* 2020;19(2):64-70.
4. Younes, N.; Al-Sadeq, D. W.; AL-Jighefee, H.; Younes, S.; Al-Jamal, O.; Daas, H. I.; Yassine, H. M. and Nasrallah, G. K. **Challenges in Laboratory Diagnosis of the Novel Coronavirus SARS-CoV-2.** *Viruses (Multidisciplinary Digital Publishing Institute).* 12 (6): 582. <https://doi.org/10.3390/v12060582>. May. 2020.
5. Rincón, A.; Moreso, F.; López-Herradón, A.; Fernández-Robres, M.A.; Cidraque, I.; Nin, J.; Méndez, O.; López, M.; Pájaro, C.; Satorra, A.; Stuard, S. and Ramos, R. **The keys to control a coronavirus disease 2019 outbreak in a haemodialysis unit.** *Clinical Kidney Journal.* 2020: 1–8.
6. Frakou, P. C.; Papaevangelou, V.; Antoniadou, A.; Kavvatha, D.; Ploussi, A.; Pantazis N.; Sirmpilantze, T.; Psarrakis, C.; Pournaras, S. A.; Tsiodras, S. and Kelekis, A. **Preliminary Data of a Quantitative Point of Care Test for SARS-CoV-2 Antibodies From Greece.** *In vivo.* 34: xxx-xxx (2020).
7. Ezhilan, M.; Suresh, I. and Nesakumar, N. **SARS-CoV, MERS-CoV and SARS-CoV-2: A Diagnostic Challenge.** *Measurement.* 168 (2021): 108335. <https://doi.org/10.1016/j.measurement.2020.108335>. Aug. 2020.
8. Daniel E. Noyola, et al. Comparison of a New Neuraminidase Detection Assay with an Enzyme Immunoassay, Immunofluorescence, and Culture for Rapid Detection of Influenza A and B Viruses in Nasal Wash Specimens. *Journal of Clinical Microbiology*, Mar. 2000, p. 1161–1165 Vol. 38, No. 3
9. Adriana Weinberg and Miranda L. Walker. Evaluation of Three Immunoassay Kits for Rapid Detection of Influenza Virus A and B. *Clinical And Diagnostic Laboratory Immunology*, Mar. 2005, p. 367–370 Vol. 12, No. 3
10. Andreea C. Cazacu, Gail J. Demmler et al. Comparison of a New Lateral-Flow Chromatographic Membrane Immunoassay to Viral Culture for Rapid Detection and Differentiation of Influenza A and B Viruses in Respiratory Specimens. *Journal of Clinical Microbiology*, Aug. 2004, p. 3661–3664 Vol. 42, No. 8.
11. Kenneth E. Irmen and James J. Kelleher. Use of Monoclonal Antibodies for Rapid Diagnosis of Respiratory Viruses in a Community Hospital. *Clinical and Diagnostic Laboratory Immunology*, May 2000, p. 396–403 Vol. 7, No. 3.
12. 1. ANN R. FALSEY and EDWARD E. WALSH. "Respiratory Syncytial Infection in Adults", *Clinical Microbiology Reviews*, July 2000, Vol. 13, No.3, p. 371-384
13. 2. DIANE C. HALSTEAD, SANDRA TODD, and GALE FRITCH; "Evaluation of Five Methods for Respiratory Syncytial Virus Detection" *Journal of Clinical Microbiology*, May 1990, Vol. 28, No. 5; p. 1021-1025.
14. Antigen-detection in the diagnosis of SARS-CoV-2 infection using rapid immunoassays. Interim guidance. 11 September 2020. Word Health Organization.

SYMBOLS FOR IVD COMPONENTS AND REAGENTS/SÍMBOLOS PARA REACTIVOS Y PRODUCTOS PARA DIAGNÓSTICO IN VITRO

| | | | | | | | | | |
|------------|---|--|---|--|---|-----|--|------------|--|
| IVD | <i>In vitro diagnostic device</i> Producto para diagnóstico <i>in vitro</i> | | Keep dry Almacenar en lugar seco | | Use by Fecha de caducidad | | Manufacturer Fabricante | LOT | Batch code Número de lote |
| | Consult instructions for use Consultar las instrucciones de uso | | Temperature limitation Limitación de temperatura | | Contains sufficient for <n> test Contiene <n> test | DIL | Sample diluent Diluyente de muestra | REF | Catalogue number Número de referencia |
| | Do not re-use No reutilizar | | CE marking/ Marcado CE | | | | | | |



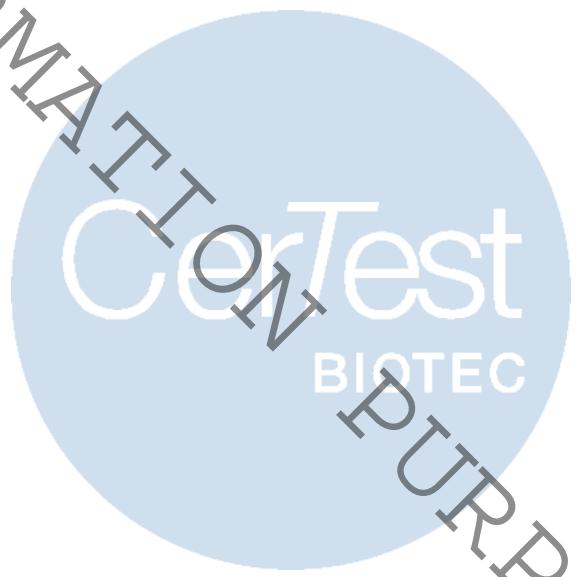

FOR INFORMATION PURPOSES ONLY



CerTest
BIOTEC S.L.

Pol. Industrial Rio Gállego II, Calle J, Nº 1,
50840, San Mateo de Gállego, Zaragoza (SPAIN)
www.certest.es



F-368 rev00