

Rapid test

Inmunodiagnóstico





Detección de antígenos en muestras fecales, de orina y respiratorias.



Listo para su uso
-No requiere equipamiento adicional.
-Vial de recolección de muestras incluido.



Resultados inmediatos, que posibilitan **decisiones rápidas**



Validado según la norma **ISO 13485** y con marcado **CE-IVD/IVDR**

Rapid Test



Infecciones gastrointestinales



Infecciones respiratorias



Marcadores tumorales e inflamatorios



Resistencia antimicrobiana

Fiabilidad diagnóstica en un formato rápido y accesible

Nuestros test rápidos están desarrollados a partir de la tecnología de **inmunocromatografía de flujo lateral**, utilizando partículas de látex coloreado que permiten una interpretación clara y precisa de los resultados.

Ofrecen una solución eficaz para la detección directa de antígenos, biomarcadores en muestras clínicas y resistencias antimicrobianas, facilitando un diagnóstico presuntivo fiable en **fases tempranas de la enfermedad**.

Diseñados para entornos reales de laboratorio, combinan **rapidez, facilidad de uso y alto rendimiento**, sin necesidad de equipamiento adicional.

Ventajas



Múltiples analitos diagnosticados en un solo dispositivo.



Resultados rápidos en **10 minutos**.



Uso e interpretación muy **sencillos**.



Varios tests a partir de una **única muestra**.



Viales específicos para la recolección de muestras **incluidos**.



Reducido coste en todo el proceso.

Lectura clara y diferenciada de resultados

Línea de control - verde
Línea de test - rojo

Posibilidad de añadir **controles positivos y negativos**.



Certest Rapid Test



Single Combo Triple Quad



Antígenos en muestras fecales ⁽¹⁾

Formato	Tipo	Referencia	Descripción
Single	Virus	AD820001V	Adenovirus
		AT820001V	Astrovirus
		EV820001V	Enterovirus
		NN820001V	Norovirus GI/GII
		R820001V	Rotavirus
	Bacterias	P820001V	Helicobacter pylori
		GD820001V	Clostridium difficile GDH
		E820001V	Escherichia coli O157
		CA820001V	Campylobacter
		SA820001V	Salmonella
		ST820001V	Salmonella typhi
		SP820001V	Salmonella paratyphi
		YE820001V	Yersinia O:3
		YC820001V	Yersinia O:9
	Parásitos	K820001V	Cryptosporidium parvum
		GW820001V	Giardia lamblia
		EH820001V	Entamoeba
Combo	Virus	XR882001V	Rotavirus + Adenovirus
		NV882001V	Norovirus GI + Norovirus GII
		RN882001V	Rotavirus + Norovirus
	Bacterias	PT882001VF	Helicobacter pylori + Transferrin
		GF882001VF	Clostridium difficile GDH + Lactoferrin
		CD882001V	Clostridium difficile Toxin A + B
		SX882001V	Enterohaemorrhagic Escherichia coli (EHEC) VT1 + VT2
		TP882001V	Salmonella typhi + Salmonella paratyphi
		YS882001V	Yersinia enterocolitica O:3 + O:9
	Parásitos	NW882001V	Crypto + Giardia
Triple	Virus	RT872001V	Rotavirus + Adenovirus + Astrovirus
		RA872001V	Rotavirus + Adenovirus + Norovirus
	Bacterias	GX872001V	Clostridium difficile GDH + Toxin A + Toxin B
		EX872001V	Escherichia coli O157 + Enterohaemorrhagic Escherichia coli (EHEC) VT1 + VT2
	Parásitos	NE872001V	Crypto + Giardia + Entamoeba
Quad	Virus	RG862001V	Rotavirus + Adenovirus + Astrovirus + Norovirus
	Bacterias	LX862001VF	Clostridium difficile GDH + Toxin A + Toxin B + Lactoferrin



Marcadores tumorales o inflamatorios ⁽¹⁾

Formato	Referencia	Descripción
Single	F820001F	FOB (Haemoglobin)
	TF20001F	Transferrin
	CP820001F	Calprotectin
	LT820001F	Lactoferrin
Combo	FT882001F	FOB + Transferrin
	PT882001VF	<i>Helicobacter pylori</i> + Transferrin
	CC882001F	Calprotectin 50 + 200
	CL882001F	Calprotectin + Lactoferrin
	GF882001VF	<i>Clostridium difficile</i> GDH + Lactoferrin
Quad	FC862001F	FOB + Transferrin + Calprotectin + Lactoferrin
	LX862001VF	<i>Clostridium difficile</i> GDH + Toxin A + Toxin B + Lactoferrin



Antígenos en muestras respiratorias ⁽²⁾

Formato	Tipo	Referencia	Descripción
Single	Virus	Y820001PC	Influenza A (Flu A)
		RV820001PC	Respiratory Syncytial Virus (RSV)
		AP820001PC	Respiratory Adenovirus
		SC820001PC	SARS-CoV-2
	Bacterias	T820201PC	<i>Streptococcus pyogenes</i> (Strep A)
Combo	Virus	Z882001PC	Influenza A+ Influenza B
		VR882001PC	Respiratory Syncytial Virus + Respiratory Adenovirus
Triple	Virus	ZS872001PC	Influenza A + Influenza B + Respiratory Syncytial Virus
		SS872001PC	SARS-CoV-2 + Influenza A+ Influenza B
Quad	Virus	ZV862001PC	Influenza A+ Influenza B + Respiratory Syncytial Virus + Respiratory Adenovirus.
		SV862001PC	SARS-CoV-2 + Influenza A+ Influenza B + Respiratory Syncytial Virus



Antígenos en muestras de orina ⁽³⁾

Formato	Tipo	Referencia	Descripción
Single	Bacterias	LP820201PC	<i>Legionella</i>
		SN820201PC	<i>Streptococcus pneumoniae</i>
Combo	Bacterias	NL820201PC	<i>Streptococcus pneumoniae</i> + <i>Legionella</i>



Resistencias antimicrobianas

Formato	Referencia	Descripción
Single	RB20001VC	Certest ResistCheck® Carbapenemasas (KPC NDM VIM OXA-48 IMP)

(1) No incluye controles. Referencia + C: incluye control positivo, Referencia + CC incluye control positivo y control negativo.
(2) Incluye control positivo, Referencia + C incluye control positivo y control negativo.
(3) Incluye control positivo y control negativo.

Optimizado para entornos reales de diagnóstico

Diseñados para mejorar la eficiencia operativa del laboratorio, reducir costes y facilitar la toma de decisiones rápidas en entornos clínicos.

Eficiencia operativa



- **Flujo de trabajo simplificado**
Una muestra, un único proceso y resultados rápidos.
- **Menor riesgo de error** gracias a la reducción de la manipulación y a una interpretación de resultados fácil y sencilla.

Rentabilidad



- **Optimización del coste total por test** sin necesidad de equipamiento adicional ni inversión en instrumentación.
- **Mayor productividad** reducción del tiempo técnico por muestreo y mejora del throughput.

Flexibilidad




- **Paneles multianálisis adaptados a diferentes necesidades clínicas**
Formatos single, combo, triple y quad.
- **Escalabilidad del portafolio**
Permite aumentar el menú diagnóstico sin mayor complejidad operativa.

Facilidad de uso



- **Kits listos para usar** con todos los componentes necesarios.
- **Viales específicos incluidos** para facilitar la toma de muestras.
- **Interpretación clara** con líneas diferenciadas de control y test.

Flujo de trabajo simplificado

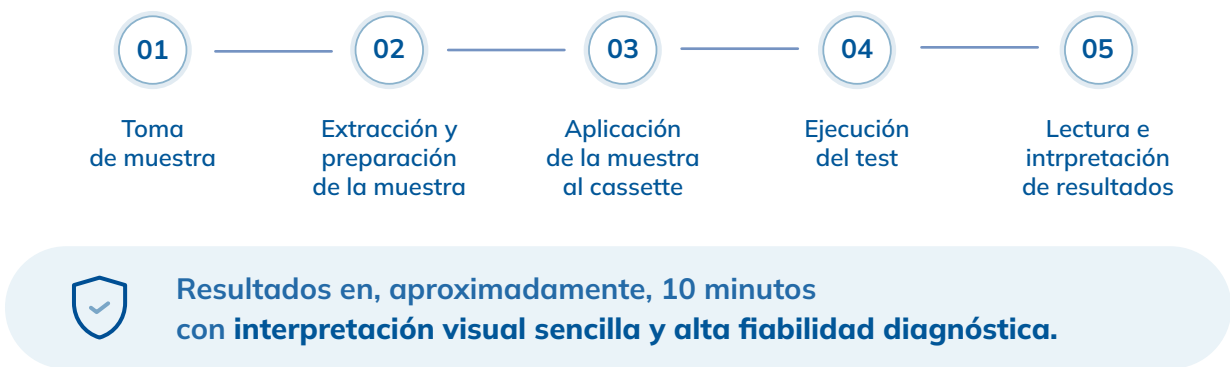

Certest ResisCheck® Carbapenemases



5 enzimas en una sola tira: KPC | NDM | VIM | OXA-48 | IMP

Ventajas

- ✓ Certificación **IVDR**
- ✓ Fabricación **europea**
- ✓ **Alta intensidad de señal** en las 5 líneas
- ✓ **Limpieza en el resultado**, membrana sin fondo
- ✓ **Mayor ventana** de campo visual de resultados
- ✓ **Línea de control diferencial** en verde
- ✓ **Tipo de muestra:** Aislados bacterianos de cualquier muestra biológica
- ✓ **Control positivo liofilizado** incluido

Flujo de trabajo



Especificaciones técnicas

» Ofrece un rendimiento demostrado en condiciones reales de laboratorio, con una concordancia global del 98,9% frente a otros ensayos consolidados.

• **PPA:** 97,3%
• **NPA:** 99,3%
• **κ = 0,97**

• **Sensibilidad:** >95% ⁽¹⁾
• **Especificidad:** 100%

» Resultados sólidos, comparables a métodos establecidos y validados en práctica rutinaria:

- Muestras previamente analizadas en rutina diagnóstica.
- Discrepancias resueltas por qPCR y secuenciación.
- Análisis estadístico formal (PPA, NPA, kappa).

⁽¹⁾ Valor medio aproximado calculado a partir de las sensibilidades clínicas obtenidas para cada diana. Consulte las IFUs para información detallada.



Accelerating Immuno- diagnostics

Diagnóstico
no invasivo

Todo incluido,
no requiere equipo
adicional

Resultados
inmediatos

Certificación ISO 13485
Marcado CE-IVD/IVDR

From Discovery
to Delivery,
Biotech you
can trust.



certest
IMMUNODIAGNOSTIC

Certest Biotec, S.L.

Pol. Industrial Río Gállego II · Calle J, Nº1
50840, San Mateo de Gállego, Zaragoza (España)
Tel. (+34) 976 520 354
sales@certest.es · www.certest.es



RAPID-TEST/GEN-0726ES

Derechos de modificación reservados. Todos los derechos reservados © Certest Biotec, S.L.
Los productos, servicios y datos mostrados en este documento pueden sufrir cambios y/o
modificaciones sobre los textos e imágenes expuestos