



VIASURE Viral Dengue 2 Positive Control

Ref. VS-VP1DEBRUO

VIASURE Viral Dengue 2 Positive Control Kit permite monitorizar todas las etapas de PCR en tiempo real con transcripción inversa (RT-qPCR), desde la extracción de ácidos nucleicos hasta la retrotranscripción y los pasos posteriores de amplificación.



▶ Partículas virales inactivadas. No infecciosas y no replicativas.



▶ Presentación **liofilizada**: transporte y almacenamiento a temperatura ambiente con una vida útil de **24 meses**.



▶ Formato monodosis para técnicas de detección de ácidos nucleicos.



▶ **Compatible con los métodos de extracción y kits de PCR más comunes.**

¿Cómo puede VIASURE Viral Dengue 2 Positive Control ayudar en el laboratorio?

- Monitoriza el rendimiento de los equipos.
- Mejorar el proceso de análisis: extracción de ácidos nucleicos, amplificación y detección.
- Permite comparar resultados entre diferentes ensayos y equipos.
- Validar y verificar diferentes ensayos que cumplan con los estándares regulatorios y de calidad.

Procedimiento:




Reconstitución del Control Positivo



Extracción de ácidos nucleicos



PCR en Tiempo Real

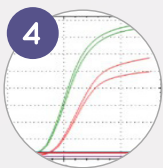

Interpretación de resultados

Reactivos suministrados:

Reactivo/Material	Descripción	Cantidad
Viral Dengue 2 Positive Control	Partícula viral no infecciosa liofilizada	4/1 viales
Viral Rehydration Buffer	Solución para la reconstitución del producto liofilizado	1 vial x 1 mL
Viral Negative Control	Control negativo	4/1 viales x 1 mL

Para más información y procedimiento de uso, consultar las instrucciones de uso incluidas en este producto.

Certest Biotec, S.L.
Pol. Industrial Río Gállego II · Calle J, Nº1
50840, San Mateo de Gállego, Zaragoza (Spain)
Tel. (+34) 976 520 354
sales@certest.es · www.certest.es



VIASURE/VP1DEBRUO-0326ES